

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 1 di 154 Allegati n.: 0
--	--	--

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI

DESTINATARI: Infermieri e Personale di Laboratorio

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
05/07/2018	TSLB <i>Claudio Busso</i>	Direttore <i>Dott. Marco Caputo</i>	Direttore <i>Dott. Marco Caputo</i>
Revisione 00 del 09/11/2012	Motivo della revisione: Trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare		
Revisione 01 del 10/01/2015	Motivo della revisione: mutamento esami service/laboratorio		
Revisione 02 del 04/11/2016	Motivo della revisione: mutamento esami service/laboratorio		
Revisione 03 del 15/03/2017	Motivo della revisione: mutamento esami service/laboratorio		
Revisione 04 del 05/07/2018	Motivo della revisione: mutamento esami da service a interno per le seguenti sigle: VAL, ACTH, FAMY, FAN, ANA, APC, BARB, ANBG, ANBM, UB2M, BKNAAT, CAIO, CALT, CALPROTECTINA, AACLG, ACLM, CDT, ACTR, COCA, UCRES, EPU, Ena SCREENING, Ena PROFILO, FEBVG, EARLY, ERIP, ETAN, ETANU, DFII, FB, HP, HIDV, RAST, FMAST, RAST2, FMAST, RAST2, RAST1, IEP, IFU, LAT, LAC, METHB, MONO, OM, OSM, PCRS, PSL, PBJ, QUAN, Ricerca parassita malarico, SCREEN1, SCREEN2, TIRG, TOXMC, OPPI, PCAC, TREPG. Eliminazione sigle: AMYI, BTEST, MB, CADD, CIC, DHT, E3 (Estriolo ed Estrone), FECI competo, PAP, IAFA, FRUT, FRUTE, HTLV12, IDROSSIPROLINA, FTEST		

*Il presente documento è di proprietà dell'Ospedale "Villa Salus" e può essere riprodotto o consegnato a terzi previa autorizzazione del Direttore Generale.
I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.*

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 2 di 154 Allegati n.: 0
--	--	---

Il presente documento è oggetto di periodica revisione e rivalutazione, in funzione dello stato dell'arte delle determinazioni analitiche riportate.

Per ogni eventuale dubbio contattate il Laboratorio di Villa Salus: 0412906015, 0412906694, 0412906769, 0412906417

N.B.: EQUIPOLLENZA PROVETTE PRELIEVO per sieratura: allo scopo di separare il siero, dalle rimanenti componenti del sangue, possono essere impiegate le seguenti tipologie di provetta: tappo rosso con gel ed attivatore, tappo beige, tappo giallo.

È opportuno impiegare provette con volumi discreti di raccolta campionaria (es. 6 cc.).

Dove risulti la modalità di conservazione "A TEMPERATURA AMBIENTE" si ricordi che essa si riferisce a determinazioni svolte nello stesso giorno del prelievo. In caso di differimento temporale tali campioni andranno, salvo diversa indicazione, conservati a circa 4°C.

SERVICE (L)= LAMM

SERVICE (S)= SYNLAB

SERVICE = DATA MEDICA

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 3 di 154 Allegati n.: 0
---	--	---

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
17KS	90.01.3	9,45	17 CHETOSTEROIDI URINARI		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		URINE 24 ORE		TEMPERATURA AMBIENTE	8 gg / L – G	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CROMATOGRAFIA SPETTROFOTOMETRIA		mg/24 h		Intervalli di riferimento		
				DONNE : 4 - 16 mg/24h UOMINI: 6 - 22 mg/24h		
Note						Data aggiornamento
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto Il campione urinario deve essere acidificato tramite l'aggiunta di 10 ml di HCl 1 N.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
17P	90.01.2	9,40	17 OH PROGESTERONE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	8 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA		ng/ml		Neonati 1 mese dopo nascita 2,4-16,8 2 mese dopo nascita 1,6-9,7 3 mese dopo nascita 0,1-3,1 Bambini 3 - 14 anni 0,07-1,7 Donne: Fase follicolare 0,1-0,8 Fase luteale 0,6-2,3 Fae ovulatoria 0,3-1,4 Gravidanza 2,0-12,0 Menopausa 0,13-051 Uomini: 0,5-2,1		
Note: Centrifugare e congelare. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						04/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
5NT	PRIVATO	22,80	5' NUCLEOTIDASI		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	15 gg /L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CINETICO		U/l		UOMINI <30 ANNI : <4,4 UOMINI >30 ANNI : <8,8 DONNE DA 10-19 ANNI : <4,4 DONNE >19 ANNI : <9,7		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012
Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACE	90.17.E	8,55	A.C.E (Angiotensin Converting Enzyme)	Angiotensin Converting Enzyme	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	6 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Spettrofotometrico		U/l		65.8 - 114.4		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 4 di 154 Allegati n.: 0


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			Ac anti LEPTOSPIRA Ig Totali	Ab anti Leptospira	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / M	
Metodo FC		Unità di misura		Intervalli di Riferimento < 1/8 NEGATIVO 1/8 - 1/16 DUBBIO >1/16 POSITIVO		
Note						Data aggiornamento 02/04/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMBG	PRIV	21	AC.ANTI -MEMBRANA BASALE DEL GLOMERULO		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / MA-VE	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <15,00		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TRAF			AC.TRANSMUCONICO Urinario f.t/i.t.		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 12 GG	
Metodo HPLC		Unità di misura µg/g creatinina		Intervalli di Riferimento Popolazione generale :<160 Soggetti professionalmente <500(f.t.) esposti		
Note - L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro o all'inizio dello stesso.						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACETF			ACETONE Urine Fine Turno		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA URINA		URINE		TEMPERATURA AMBIENTE		8 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFICO		mg/l		Popolazione generale: < 2 Soggetti professionalmente esposti: Acetone:<25 (f.t.) Isopropanolo:<40 (f.t./f.s.l)		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro						17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACETI			ACETONE Urine Inizio Turno		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura mg/l		Intervallo di Riferimento Popolazione generale: < 2 Soggetti professionalmente esposti: Acetone:<25 (f.t.) Isopropanolo:<40 (i.t.)		
GAS CROMATOGRAFICO						
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro						17/03/2017

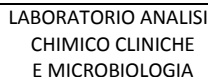

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 5 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SIDRO	90.02.1	14,10	ACIDO 5-OH INDOLACETICO	SEROTONINA- TRIPTAMINA- 5 HIAA	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L-M-M-G-V-
Metodo		Unità di misura mg/24h		Intervallo di Riferimento 2.0-10.0		
Cromat.-Spettrofotometrico						
Note						Data aggiornamento
Le urine vanno raccolte nel vaso contenente 10 ml di acido cloridrico concentrato. Richiedere al Laboratorio il contenitore. 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine, fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole in frigo 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Prelevare dal vaso di raccolta 10 ml di urina acidificata e travasarla nelle due provette. 5. Consegnare al Laboratorio 6. Indicare sempre la diuresi totale.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AFUI			ACIDO FENILGLIOSSILICO Inizio Turno		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA URINA		URINE DI INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		7 gg
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
HPLC		microg/g di Creatinina		esposizione professionale <250		
Note						Data aggiornamento
L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro						10/01/2015

AFUI			ACIDO FORMICO Inizio Turno		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE DI INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura <i>mg/gCreat.</i>		Intervallo di Riferimento <i>Non esposti</i> 1.2 - 17.5 <i>Descr. Agg.</i> ESPOSIZIONE A METANOL <i>Descr. Agg.</i> BEL ACGIH '93-'94 : 80		
ENZIMATICO-SPETTROFOTOMETRICO 25°C						
Note						Data aggiornamento
L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del turno di lavoro						10/01/2015

AFUF		ACIDO FORMICO Fine Turno		NO		SERVICE	
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE DI INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg	
Metodo ENZIMATICO-SPETTROFOTOMETRICO 25°C		Unità di misura <i>mg/gCreat.</i>		Intervalli di Riferimento <i>Non esposti</i> 1.2 - 17.5 <i>Descr. Agg.</i> ESPOSIZIONE A METANOLO <i>Descr. Agg.</i> BEI ACGIH '93-'94 : 80			
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta al termine del turno di lavoro							Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 6 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AIUI			ACIDO IPPURICO Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
Metodo HPLC		Unità di misura g /g di Creatinina		Intervalli di Riferimento Esposizione professionale a Toluene:<1.6 g/g di creat.(f.t)		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del turno di lavoro						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FIUI			ACIDO IPPURICO Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA URINA		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		8 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC		g/ g di Creatinina		Esposizione professionale a Toluene:<1.6 g/g di creat.(f.t)		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FMAU			ACIDO MANDELICO Urinario fine turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 GG
Metodo HPLC		Unità di misura g/g creatinina		Intervalli di Riferimento ESPOSIZIONE A STIRENE SOMMA DI ACIDO MANDELICO + FENILGLIOSSILICO: BEI ACGIH: 0.4 ESPOSIZIONE A ETIL-BENZENE SOMMA DI ACIDO MANDELICO + FENILGLIOSSILICO: BEI ACGIH: 700		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMIT			ACIDO METILIPPURICO Urinario Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg	
Metodo HPLC		Unità di misura g/g Creatinina		Intervalli di Riferimento Esposizione professionale a Xileni: <1.5 g/g creat.(i.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 7 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMFT			ACIDO METILIPPURICO Urinario Fine Turno		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 GG	
Metodo HPLC		Unità di misura g/g creatinina		Intervalli di Riferimento Esposizione professionale a Xileni: <1.5 g/g creat.(f.t.)		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ASFM			ACIDO S-FENIL MERCAPTURICO Urinario Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 GG	
Metodo HPLC		Unità di misura µg/ g Creatinina		Intervallo di Riferimento Popolazione generale: < 10.00 Popolazione esposta : <25.00 ACGIH 2014		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro						Data aggiornamento 16/03/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TTMA			ACIDO TRANS- TRANSMUCONICO		NO	SERVICE
Inizio Turno						
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 7 gg
1 PROVETTA DA URINA		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		/ L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura µg/ g Creatinina		Intervalli di Riferimento		
HPLC				Esposizione a Benzene, BEI= 500		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
URC	??	1,10	ACIDO URICO PLASMATICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento		
ENZIMATICO COLORIMETRICO				MASCHI: 3.5-7.0 FEMMINE: 2.5-6.5		
Note						Data aggiornamento
						21/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 8 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UURC	90.43.5	1,10	ACIDO URICO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/24 ore		Intervalli di Riferimento 15 - 900		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso. 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome . Recapitare al Laboratorio al più presto						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VAL	90.03.4	8,25	ACIDO VALPROICO	DEPAKIN- AC.DIPROPILACETICO	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo FLIORESCENZA.POL		Unità di misura microg/ml		Intervalli di Riferimento 50-100		
Note: Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VMA	90.03.5	18,15	ACIDO VANILMANDELICO (VMA)	METABOLITI CATECOLAMINE AVM	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE		Conservazione / Stabilità Tempi di TEMPERATURA AMBIENTE 7 gg		consegna / G
Metodo HPLC		Unità di misura mg/24h		Intervalli di Riferimento < 6.6		
Note Le urine vanno raccolte nel vaso contenente 10 ml di acido cloridrico concentrato. Richiedere al Laboratorio il contenitore. 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine, fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole in frigo 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Prelevare dal vaso di raccolta 10 ml di urina acidificata e travasarla nelle due provette. 5. Inviare al Laboratorio 6. Indicare sempre la diuresi totale. Lo stress e l'esercizio fisico durante il periodo di raccolta delle urine 24 ore possono modificare i risultati del dosaggio. Alcuni pazienti con neuroblastoma sono positivi per l'acido omovanilico urinario ma senza presentare alti livelli urinari di VMA. L'esame si esegue sulle urine delle 24 ore. Nelle 48 ore che precedono il test devono essere esclusi i seguenti alimenti: banane, noccioline, cereali, grano, the', caffè', gelatine, frutti a base di citrato, cioccolato, vaniglia, formaggio.,						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACTH	90.15.2	18,10	ACTH	OR.ADRENOCORTI COTROPO	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento < 0 = 46		
Note: Inviare in apposito contenitore a - 20°C						Data aggiornamento
						05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 9 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ADG	91.13.4	5,55	ADENOVIRUS riverca Ag (feci)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 CONTENIOTRE FECI STERILE		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità10/01/2015 TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / MA - ME - VE	
Metodo EIA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTE		
Note Il campione deve essere conservato a 2-8 °C e pervenire al laboratorio entro 48 ore dal prelievo/raccolta						Data aggiornamento
						10/01/2015
Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ADG	91.13.4	5,55	ADENOVIRUS IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità10/01/2015 TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / MA - ME - VE	
Metodo ELISA		Unità di misura Titolazione		Intervalli di Riferimento <8,5 : NEGATIVO 8,5-11,5 : DUBBIO >11,5 : POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ADM	91.13.4	5,55	ADENOVIRUS IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / MA - ME - VE	
Metodo ELISA		Unità di misura Titolazione		Intervalli di Riferimento <8,5 : NEGATIVO 8,5-11,5 : DUBBIO >11,5 : POSITIVO		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAD+ SNAD	90.04.2	20,20	ADRENALINA - NORADRENALINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE Litio EPARINA (Tappo verde)		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V	
Metodo HPLC		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento ADRENALINA 20 - 190 NORADRENALINA 70 - 480		
Note Prelievo in litio eparina. Centrifugare entro 1 ora. Mantenere a - 20°C negli appositi contenitori						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 10 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAD+ SNAD	90.04.2	20,20	ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
2 PROVETTE URINE 24 ORE		URINE 24 ORE		IN FREEZER		7 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC-FLUORIMETRIA		ug/24H		Diuresi ml Adrenalina (Epinefrina): 2-22 Noradrenalina (Norepinefrina) :20-81 Dopamina 120-400		
Note						Data aggiornamento
Raccolta urine 24 ore: eliminare le prime urine del mattino, raccogliere tutte le urine successive sino alle prime, comprese, del mattino successivo alla stessa ora.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALB	90.05.1	2,30	ALBUMINA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura g/dl		Intervalli di Riferimento 3,40-5,00		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALBU	??	2,30	ALBUMINA URINARIA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento 35.6 - 46.1		
NOTE 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto						Data aggiornamento 19/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALS	90.05.2	2,45	ALDOLASI		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura u/L		Intervalli di Riferimento <7,6		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 11 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALDC	90.05.3	12,90	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (plasma)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura pmol/ml		Intervalli di Riferimento 32.40 - 653.70		
Note Prelievo dopo che Paziente è stato steso per almeno un'ora. L'analisi viene eseguita nel sangue (plasma) Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente a -20°C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALDR	90.05.3	12,90	ALDOSTERONE ORTOSTATISMO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (plasma)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura pmol/ml		Intervalli di Riferimento 70.0 - 1086.0		
Note Prelievo dopo che Paziente è stato in posizione eretta per almeno un'ora L'analisi viene eseguita nel sangue (plasma) Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente a -20°C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALDU	90.05.3	12,90	ALDOSTERONE URINARIO		NO	SERVICE (S)
2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura mcg/24 hs		Intervalli di Riferimento 5.0-19.0		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chius 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ATRIIP	90.05.4	5,55	ALFA 1 ANTITRIPSINA	AAT	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
PROVETTA TAPPO ROSSO		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		
Metodo		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOMETRICO				90-200		
Note						Data aggiornamento
						03/04/2015

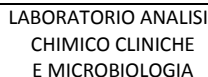

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 12 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AL	90.07.1		ALLUMINIO (plasmatico)		SI	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VERDE(*)		Materiale SANGUE (PLASMA Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo ASS. ATOMICO HGA-FORNO A GRAFITE		Unità di misura µg/l		Intervallo di Riferimento < 10		
Note						Data aggiornamento 10/05/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 13 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALUI	90.07.1		ALLUMINIO (urine inizio truno)		SI	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo ASS. ATOMICO HGA-FORNO A GRAFITE		Unità di misura µg/g Creat		Intervalli di Riferimento < 20		
Note Nella raccolta dei campioni occorre prestare grande attenzione al rischio di contaminazione esterna: polvere ambientale, contatto con mani od altre parti del corpo, presenza di metalli nel contenitore. La ricerca si esegue nelle urine di inizio turno lavorativo Addebito aggiuntivo di: CREATININA URINE FINE TURNO						Data aggiornamento
						10/05/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ALUF	90.07.1		ALLUMINIO (urine fine turno)		SI	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 7 gg /
1 PROVETTA URINE		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		L – M – M – G – V – S
Metodo ASS. ATOMICO HGA-FORNO A GRAFITE		Unità di misura µg/g Creat.		Intervalli di Riferimento < 20		
Note Nella raccolta dei campioni occorre prestare grande attenzione al rischio di contaminazione esterna: polvere ambientale, contatto con mani od altre parti del corpo, presenza di metalli nel contenitore. La ricerca si esegue nelle urine di fine turno lavorativo Addebito aggiuntivo di: CREATININA URINE FINE TURNO						Data aggiornamento
						10/05/2015


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MDMA	PRIVATO		AMFETAMINE/ METAMFETAMINE MDMA(ECSTASY)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna	
1 CAMPIONE URINE						
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOCHIMICO				NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio - Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMY	90.06.1	6,70	AMILASI		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo pNPG7 A 37° C		Unità di misura U/l		Intervalli di Riferimento <108		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

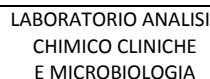


Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 14 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMMO	90.07.5	8,05	AMMONIO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità IN BAGNO DI GHIACCIO/CONGELATO (VEDI NOTA)		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo MICRODIFFUSIONE		Unità di misura µg/dl		Intervalli di Riferimento <52		
Note: Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						9/11/2012

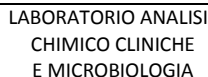

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 15 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANGIO	??	??	ANGIOTENSINA II		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura ng/l		Intervallo di Riferimento 20.0 - 40.0		
Note: Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						10/01/2015

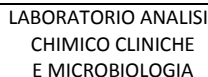


Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 16 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANK	PRIVATO		ANISAKIS Ig G		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA BEIGE		SANGUE (SIERO)		TEMPERATURA AMBIENTE		8 GG
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IFI				< 10		
Note						Data aggiornamento
						10/10/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANTUI			ANTIMONIO URINARIO (URINE INIZIOTURNO)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		15 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
ASSORBIMENTO ATOMICO		µg/L		Popolazione generale: < 3.0		
Note						Data aggiornamento
La ricerca si esegue nelle urine di inizio turno lavorativo.						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANTUF			ANTIMONIO URINARIO (URINE FINE TURNO)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/L		Intervallo di Riferimento Popolazione generale: < 3.0		
Note La ricerca si esegue nelle urine di fine turno lavorativo.						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANA	90.52.4	8,50	ANTI NUCLEO Abs		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura Titolo		Intervalli di Riferimento < 1/40		
IFI						
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

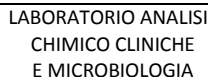

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 17 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AF8	90.49.4	10,10	ANTICORPI ANTI FATTORE VIII		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELATO	Tempi di consegna 10 GG-L-M-M-G-VE-	
Metodo PHO		Unità di misura BU/ml		Intervallo di Riferimento FINO A 0,5		
Note: Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati.						Data aggiornamento


 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 18 di 154 Allegati n.: 0
		LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LEG	90.95.3	16,30	ANTICORPI ANTI LEGIONELLA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L-M-M-G-V-	
Metodo IMMUNOFLUORESCENZA IND.		Unità di misura TITOLO		Intervalli di Riferimento Abs anti L.Pneumophila tipo 1 : <1/256 =Negativo Abs anti L.Pneumophila tipo 2-6 : <1/256 =Negativo		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMICR	90.51.4	10,10	ANTICORPI ANTI MICROSOMIALI		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 GG/L-M-M-G-V-S	
Metodo RIA		Unità di misura U.I./ml		Intervalli di Riferimento <100		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AT3	90.57.5	2,45	ANTITROMBINA III		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo CROMOGENICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 75-125		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
APC	90.77.2	8,00	APC RESISTANCE (resistenza alla proteina C reattiva)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COAGULATIVO		Unità di misura RATIO		Intervalli di Riferimento >2.2		
Note: Centrifugare subito e congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						05/07/2018

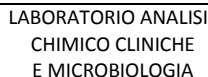

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 19 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
WNG	PRIVATO		ARBOVIRUS - FLAVIVIRUS - WEST NILE Abs IgG		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG/L-M-M-G-V-	
Metodo EMOAGGLUTINAZIONE		Unità di misura TITOLO		Intervallo di Riferimento <1/20		
Note						Data aggiornamento

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 20 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
WNM	PRIVATO		ARBOVIRUS - FLAVIVIRUS - WEST NILE Abs IgM		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG/L-M-M-G-V-	
Metodo EMOAGGLUTINAZIONE		Unità di misura TITOLO		Intervalli di Riferimento <1/20		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AS	??	??	ARSENICO EMATICO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VERDE		Materiale SANGUE (PLASMA Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/L		Intervalli di Riferimento Soggetti esposti:< 35,00		
Note						Data aggiornamento
Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ARSF			ARSENICO URINARIO Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE (INIZIO TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 20 GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/L		Intervalli di Riferimento Soggetti esposti:< 35,00		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circ						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ARSF			ARSENICO URINARIO Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE (FINE TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 20 GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/L		Intervalli di Riferimento Soggetti esposti:< 35,00		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/09/2015

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 21 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SPR	PRIVATO		ASPERGILLO ANTIGENE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		15 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOENZIMATICO		Index		<0,5		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AST			AST (GLUTAMMICO-OSSALACETICOTRANSAMINASI)(GOT)	AST	SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo ENZIMATICO IFCC A 37°C		Unità di misura U/l		Intervallo di Riferimento < 37		
Note						Data aggiornamento
						10/05/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita ATA (Acido TRICLOROACETICO) (urine fine turno)	Sinonimo	Ric. Urgente NO	Laboratorio SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE (FINE TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V	
Metodo SPETTROFOTOMETRICO		Unità di misura mg/l		Intervallo di Riferimento <i>ESPOSIZIONE A TRICLOROETILENE BEI ACGIH: 15 mg/l. ESPOSIZIONE A METILCLOROFORMIO BEI ACGIH: 10 mg/L ESPOSIZIONE A TRICLOROETANOLO BEI ACGIH: 10 mg/l N.B. IN CASO DI ESPOSIZIONE MISTA ATTENERSI AL BEI PIU' ELEVATO</i>		
Note La ricerca si esegue nelle urine di fine turno lavorativo. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						10/09/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 22 di 154 Allegati n.: 0

			ATA (Acido TRICLOROACETICO) (urine inizio turno)		NO	SERVICE (L)
ipologia provetta / contenitore		Materiale URINE (FINE TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V
1 PROVETTA URINE						
Metodo SPETTROFOTOMETRICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento <i>ESPOSIZIONE A TRICLOROETILENE BEI ACGIH: 100 mg/gCreat. ESPOSIZIONE A PERCLOROETILENE BEI ACGIH: 3.5 mg/L ESPOSIZIONE A METILCLOROFORMIO BEI ACGIH: 10 mg/L</i> <i>ESPOSIZIONE A TRICLOROETANOLO BEI ACGIH: 10 mg/l N.B. IN CASO DI ESPOSIZIONE MISTA ATTENERSI AL BEI PIU' ELEVATO</i>		
Note La ricerca si esegue nelle urine di fine turno lavorativo. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
A	90.44.1	1,35	AZOTEMIA (UREA)		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 15 - 38,5		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UA	90.44.1	1,35	AZOTURIA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura g/24 ore		Intervalli di Riferimento 15-43		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BARB			BARBITURICI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA URINA		URINE ESTEMPORANEE		TEMPERATURA AMBIENTE		7 L-M-M-G-V- SU APPUNTAMENTO
Metodo		Unità di misura microg/ml		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOCHEMICO				Negativo (Cut-Off: 200)		
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio						05/07/2018
- Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						

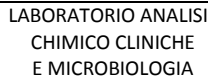

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 23 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UBENI			BENZENE URINARIO INIZIO TURNO		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE (INIZIO TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 15 GG
Metodo GASGROMATOGRAFIA		Unità di misura ng/l		Intervallo di Riferimento Popolazione generale : <575 LBE 2001		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + °C.						Data aggiornamento
						10/05/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 24 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BENZ			BENZODIAZEPINE SIERICHE (SCREENING)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V-	
Metodo LC-MASSA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Lorazepam R.Ter. 10 - 100 Clonazepam R.Ter. 10 - 100 Flunitrazepam R.Ter. 5 - 50 Clordemetildiazepam R.Ter. 10 - 100 Nordiazepam R.Ter. 100 - 2000 Clobazam R.Ter. 200 - 1000 Diazepam R.Ter. 100 - 1500 Midazolam R.Ter. 100 - 1000 Nitrazepam R.Ter. 20 - 120 Triazolam R.Ter. 5 - 15 Oxazepam R.Ter. 200 - 1400 Flurazepam R.Ter. 0 - 50		
Note - L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio - Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						Data aggiornamento 9/24/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BENZ			BENZODIAZEPINE (urine estemporanee)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V- SU APPUNTAMENTO	
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Intervallo terapeutico Limite minimo di determinazione: 3		
Note - L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio - Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						Data aggiornamento 9/24/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANBG			BETA 2 GLICOPROTEINA 1 ANTICORPI IGG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L- G	
Metodo MULTIPLEX LUMINEX		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <20		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANBM			BETA 2 GLICOPROTEINA 1 ANTICORPI IGM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg / L– G
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <20		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

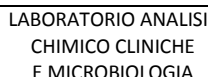

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 25 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UB2M	90.10.1	9,50	BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOTURBIMETRIA		Unità di misura mg/24h		Intervallo di Riferimento 0,03-010		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare in Laboratorio al più presto						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BETAM	90.27.5	12,60	BETA HCG MASCHI		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo		Unità di misura mUI/ml		Intervallo di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA DIRETTA				UOMINI: <10		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 26 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BF	90.10.5	3,70	BILIRUBINA FRAZIONATA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L - M - M - G - V - S
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento <0,30		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BF	90.10.4	2,30	BILIRUBINA TOTALE		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L - M - M - G - V - S	
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento <1.00		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BKC	91.02.2	14,10	BK COLTURALE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
CONTENITORE STERILE		URINE DEL MATTINO-ESCREATO-BASSANGUE		IN FRIGORIFERO		PRENDERE ACCORDI CON IL LABORATORIO
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
COLTURALE				Negativo		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BK	91.02.4	3,10	BK NAAT Solo per INTERNI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
CONTENITORE STERILE		URINE 24 ORE – ESCREATO-BAS		IN FRIGORIFERO	PRENDERE ACCORDI CON IL LABORATORIO	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
MICROSCOPICO				Negativo		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LYMEG	90.87.5	6,60	BORRELIA Anticorpi IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 27 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LYMEM	90.87.5	6,60	BORRELIA Anticorpi IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CPEP	90.11.1	10,20	C PEPTIDE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 0,81-3,85		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C1	90.60.1	5,45	C1 INATTIVATORE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità REFRIGERARE (VEDI NOTA)	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo NEFELOMETRIA		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 15-35		
Note: Siero conservato a +2, +8 °C (frigorifero) se analizzato entro 8 gg. dal prelievo, altrimenti congelare.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C1Q	90.60.2	5,85	C1Q FRAZIONE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C3	90.60.2	5,85	COMPLEMENTO C3		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRIA		Unità di misura m g/dl		Intervalli di Riferimento 90-180		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 28 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C3	90.60.2	5,85	COMPLEMENTO C3 ATTIVATORE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità VEDI NOTA	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V	
Metodo NEFELOMETRIA		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento 0.75 - 1.40		
Note: il campione può essere mantenuto a temperatuta ambiente se consegnato entro tre ore, dal prelievo, al Vettore di Service. Nel caso l'intervallo di tempo, di cui sopra, fosse superiore alle tre ore si dovrà separare il siero per centrifugazione ed il materiale biologico (siero) dovrà essere congelato a - 20 °C. Il materiale biologico congelato va consegnato nell'apposito contenitore.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C4	90.60.2	5,85	C4 COMPLEMENTO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 10-40		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C125	90.55.1	16,35	CA 125		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		2 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		U/ml		<30,20		
Note						Data aggiornamento
Si suggerisce di non eseguire l'esame durante il periodo mestruale						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C153	90.55.2	15,95	CA 15-3		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <32,4		
CHEMILUMINESCENZA		DIRETTA				
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 29 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
C199	90.55.2	15,95	CA 19-9		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 37.0		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CA50	90.55.5	13,70	CA 50 Antigene CARBOIDRATICO 50		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – ME – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CA72	90.56.1	16,30	CA 72-4		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V
Metodo ECLIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <6.0		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CADM			CADMIO Ematico		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA Li-EPARINA (tappo VERDE)		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 GG
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale:< 2 Esposizione professionale a Cadmio e composti inorganici BEI ACGIH: <5		
Note Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/10/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCADI			CADMIO URINARIO (Inizio Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE (INIZIO TRUNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/g creatinina		Intervalli di Riferimento Popolazione generale:< 2 Esposizione professionale a Cadmio e composti inorganici BEI ACGIH: <5		
Note - L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/8/2013

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 30 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCADF			CADMIO URINARIO (Fine Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE (FINE TURNO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/g creatinina		Intervalli di Riferimento Popolazione generale:< 2 Esposizione professionale a Cadmio e composti inorganici BEI ACGIH: <5		
Note - L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
		5,80	CALCIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg / L – G
Metodo Colorimetrico		Unità di misura mg/dl		Intervallo di Riferimento 8.5-10.5		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CAIO	PRIV	5,80	CALCIO IONIZZATO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg / L – G
Metodo CALCOLO DERIVATO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 4,5-5,3		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCA	90.11.4	1,10	CALCIO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura mg/24 ore		Intervalli di Riferimento 40-350		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 31 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CALT	90.11.5	12,85	CALCITONINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento Uomo: <18,20 Donna: <11.5		
Note: Centrifugare subito e congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CALC	90.12.1	8,90	CALCOLO RENALE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE DI PLASTICA PULITO		Materiale CALCOLO RENALE (CONCREZIONE)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHIMICO-FISICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note: Comunicate sempre: Comune di nascita, residenza e codice fiscale del Paziente						Data aggiornamento 24/01/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	??		CALPROTECTINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
		FECI		TEMPERATURA AMBIENTE		15 gg /L-M-M-G-V-
1 CONTENITORE FECI						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
		ug/g		< 50 NEGATIVO		
IMMUNOMETRICO				50 - 100 POSITIVO BASSO		
				> 100 POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CAMJ CAMF			CAMPYLOBACTER Anticorpi (Jejuni + Fetus)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo KBR COMPLEMENT BINDING		Unità di misura Titolazione		Intervalli di Riferimento JEJUNI : <1/8 FETUS : <1/128		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 32 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CANDA	PRIVATO		CANDIDA ALBICANS IgA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 GG
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 8,5		
Note						Data aggiornamento
						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CANDG	PRIVATO		CANDIDA ALBICANS IgG		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 GG
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 25 : Negativo 25-30: Dubbio >30 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CANDM	PRIVATO		CANDIDA ALBICANS IgM		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 GG
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 8,50		
Note						Data aggiornamento
						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			CANNABINOIDI (TEST DI CONFERMA)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)	Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg / L – G	
Metodo CROMATOGRAFIA DI MASSA		Unità di misura ng/ml	Intervalli di Riferimento NEG.(CUT-OFF A 15)			
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 33 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TIBC	90.42.4 90.42.5	3,50 5,65	CAPACITA' FERRO LEGANTE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo CALCOLO DERIVATO		Unità di misura mg/dl TRANSFERRINA FE µg/dl		Intervalli di Riferimento <4 gg. 130-275 >4 gg 200-360 0-12 anni 100-400 >12 anni 250-400		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CARB	90.12.3	11,80	CARBAMAZEPINA (Tegretol)	TEGRETOL	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura microg/ml		Intervalli di Riferimento 8,0-12,0		
Note						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACLG	90.47.5	11,10	CARDIOLIPINA Anticorpi IGG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 6 gg / L – ME - G
Metodo EIA		Unità di misura GPL-U/ml		Intervalli di Riferimento < 12 NEGATIVO 12 - 18 DUBBIO > 18 POSITIVO		
Note						Data aggiornamento 07/05/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACLM	90.47.5	11,10	CARDIOLIPINA Anticorpi IGM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 6 gg / L – ME - G	
Metodo EIA		Unità di misura MPL-U/ml		Intervalli di Riferimento MPL Descr.Aggr. 		

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 34 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita		Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MAPC	91.31.2 91.36.5	82,05	CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO			NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CORTE TAPPO VERDE		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 25 gg	
Metodo CITOGENETICA		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento vedi allegato			
Note							Data aggiornamento
NB. L'ESAME NON SI ACCETTA DI VENERDI' E NEI GIORNI PREFESTIVI							9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
		20,20x2	CATECOLAMINE FRAZIONATE PLASMATICHE	ADRENALINA/ NORADRENALINA/ DOPAMINA	NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
2 PROVETTE DA EMOCROMO		PLASMA		CONGELATO		7 gg / ME
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC		pg/ml		ADRENALINA : 70 - 480 NORADRENALINA: 20 - 190 DOPAMINA: < 30		
Note						Data aggiornamento
Prelevare 7 ml di sangue venoso in provetta contenenti Li-Eparina come anticoagulante. Centrifugare subito dopo a 3000 rpm per 3 minuti in centrifuga refrigerata (4°C). Prelevare circa 3 ml di plasma . Congelare il campione a – 20 °C ed inviare il campione negli appositi contenitori a – 20 °C.						17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UAD+UNAD	90.04.3x2	20,20x2	CATECOLAMINE FRAZIONATE URINARIE	ADRENALINA/ NORADRENALINA/ DOPAMINA	NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg / ME	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC		µg/24h		ADRENALINA: < 27 NORADRENALINA: < 97 DOPAMINA: < 500		
Note						Data aggiornamento
						17/03/2017
Le urine vanno raccolte nel vaso contenente 10 ml di acido cloridrico concentrato. Richiedere al Laboratorio il contenitore.						
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00)						
2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine, fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole in frigo 3.						
Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore						
4. Prelevare dal vaso di raccolta 10 ml di urina acidificata e travasarla nelle due provette.						
5. Inviare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C. 6.						
Indicare sempre la diuresi totale						


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 35 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BAT	90.86.1	10,75	CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC)Esame Colturale		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
PIASTRA DI AGAR SANGUE (o contenitore sterile)		CVC		A 37° C. (temperatura ambiente/invio immediato, vedi Note)	7 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
COLTURALE				Negativo		
Note						Data aggiornamento
Contattare Microbiologia Laboratorio Analisi						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CDT			CDT TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DEDICATA E BEN TAPPATA		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 6 gg / L – M – M – G – V	
Metodo Elet. Capillare (EC)		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento Fino a 1.6		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	90.56.3		CEA (Antigene carcinoembrionario)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	2 GG/ L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento		
ECLIA				< 2.5: NEGATIVO 2.5-4.5: ZONA GRIGIA (seguire nel tempo)(fumatori) >4.5: POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ENDG	PRIVATO		CELLULE ENDOTELIALI IGG		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 15 GIORNI
Metodo IFI		Unità di misura TITOLO		Intervalli di Riferimento <1/20 NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento

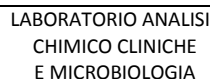

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 36 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLMPA	90.89.1	10,20	CHLAMYDIA PNEUMONIAE Anticorpi IGA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / L – G	
Metodo ELISA		Unità di misura U.A		Intervalli di Riferimento < 8,5: Negativo 8,5-11,5: Dubbio > 11,5: Positivo		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

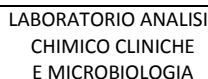

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 37 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLMG	90.89.1	10,20	CHLAMYDIA TRACHOMATIS Anticorpi IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg / L – G
Metodo EIA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 38 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLA	90.83.4 91.36.5	46,15	CHLAMIDIA TRACHOMATIS Biologia Molecolare		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale (dna) VAGINALE URETRALE CONGIUNTIVA		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / – MA – G –	
Metodo PCR REAL TIME		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLSP	90.13.2	14,35	CICLOSPORINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale ANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 6 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento 1<30		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CMA	90.83.8	43,30	CITOMEGALOVIRUS AVIDITA' IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V
Metodo ECLIA		Unità di misura Indice		Intervalli di Riferimento Indice >= 55: esclude infezione negli ultimi 3 mesi Indice < 45: non esclude la possibilità di infezione negli ultimi 3 mesi		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FCMQ	91.11.5 + 91.36.5	56,05 + 40,10	CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 17 gg	
Metodo PCR-RT		Unità di misura copie /ml		Intervalli di Riferimento <100 limite sensibilità		
Note Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE. 						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 39 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CMG	90.14.1	2,75	CITOMEGALOVIRUS IGG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ELISA		Unità di misura UA		Intervalli di Riferimento < 9: NEGATIVO 9-11: DUBBIO >11: POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						15/07/15

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CMM	90.14.1	2,75	CITOMEGALOVIRUS IGM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
Metodo ELISA		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						15/07/15

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCMV	91.15.4	44,50	CITOMEGALOVIRUS DNA Ricerca nelle urine		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
CONTENITORE STERILE		URINA DEL MATTINO (5 ml)		CONGELARE	7 gg	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
PCR - RT		Copie/ml		Limite inferiore sensibilità: 100 Copie/ml		
Note: congelare immediatamente. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AAGN	90.48.2	10,10	CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI (ANCA)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / M – V
Metodo IFI		Unità di misura TITOLO		Intervalli di Riferimento c-ANCA <1/20 p-ANCA <1/20		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 40 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CMVM	90.14.1	2,75	CITRATURIA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / L – G	
Metodo ELFA		Unità di misura mmol/24hs		Intervalli di Riferimento 1.7-6.6		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACTR	90.47.D	10,40	CITRULLINA Anticorpi	CCP - anti-citrullinasi o anti-CCP (peptidasi ciclico citrullinasi)	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 3 gg	
Metodo ECLIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 4		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CK	90.15.4	2,30	CREATIN FOSFO-CHINASI (CPK o CK)	CPK	SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura U/l		Intervalli di Riferimento <232		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CL	90.13.3	1,10	CLORO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo POTENZIOMETRIA INDIRETTA		Unità di misura mmol/l		Intervalli di Riferimento 95-110		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

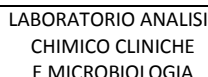

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 41 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLOFUI	??	??	CLOROFORMIO URINE (INIZIO TURNO)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità Tempi di - M - M - G - V	consegna TEMPERATURA AMBIENTE 7 gg / L	
1 PROVETTA URINE						
Metodo GAS-CROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Soggetti professionalmente esposti: non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 42 di 154 Allegati n.: 0
--	---	--

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLOFUF	??	??	CLOROFORMIO URINE (FINE TURNO)	TRICLOROMETANO	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		7 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS-CROMATOGRAFICO		mg/l		Soggetti professionalmente esposti: non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLOME	??	??	CLORURO DI METILENE	DICLOROMETAN 3	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO VERDE		Materiale SANGUE (PLASMA Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo GAS-CROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: Non rilevabile Soggetti professionalmente esposti: <0.5		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLOMUI	??	??	CLORURO DI METILENE (INIZIO TURNO)	DICLOROMETAN 3	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS-CROMATOGRAFICO		mg/l		Popolazione generale: Non rilevabile		
				Soggetti professionalmente esposti: <0.3		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 43 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CLOMUF	??	??	CLORURO DI METILENE (FINE TURNO)	DICLOROMETAN D	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA URINE		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS-CROMATOGRAFICO		mg/l		Popolazione generale: Non rilevabile Soggetti professionalmente esposti: <0.3		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CDI	90.91.1	5,15	CLOSTRIDIUM DIFFICILE			INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
CONTENITORE PER FECI		FECI				
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
		NEGATIVO		ANTIGENE GDH : NEGATIVO TOSSINA A/B : NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CO	??	??	COBALTO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 7 gg
2 PROVETTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA Li Eparina)		TEMPERATURA AMBIENTE		/ L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASS. ATOMICO		µg/l		Popolazione generale: 0.1-1.0		
				Soggetti professionalmente esposti: <1.0		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COUI	??	??	COBALTO (URINE INIZIO TURNO)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna 7 gg	
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	/ L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASS. ATOMICO		µg/l		Soggetti non esposti: 0.2-2.0		
				Soggetti professionalmente esposti: <15		
				.0		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 44 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COUF	??	??	COBALTO (URINE FINE TURNO)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna 7 gg	
1 PROVETTA URINE		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	/ L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASS. ATOMICO		µg/l		Soggetti non esposti: 0.2-2.0		
				Soggetti professionalmente esposti: <15		
				.0		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COCA			COCAINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATUA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V- SU APPUNTAMENTO
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Negativo		
IMMUNOCHEMICO						
Note						Data aggiornamento
- L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio - Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COL	90.14.3	1,20	COLESTEROLO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento < 200		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HDL	90.14.1	2,75	COLESTEROLO HDL		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento > 45		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 45 di 154 Allegati n.: 0

Sigla LDL	Codice Regionale	Ticket	Analita COLESTEROLO LDL	Sinonimo	Ric. Urgente NO	Laboratorio INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento Rischio di malattia cardio-vascolare Presenza di rischio moderato/basso: < 115 Presenza di rischio elevato: < 100 Presenza di rischio molto elevato: < 70 Riferimento: Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., et al. Eur. J. Prev. Cardiol. 27/06/2016		
Note						Data aggiornamento 30/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CHE	90.14.4	2,30	COLINESTERASI Pseudocolinesterasi		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura U/l		Intervalli di Riferimento 7000 - 19000		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACHE	90.14.4	2,30	ACETIL-COLINESTERASI eritrocitaria		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VIOLA (EDTA)		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo Spettrofotometrico a 25 °C		Unità di misura mU/10**9 erit.		Intervalli di Riferimento 506-720 <i>ESPOSIZ.A PARATHION E ORGANOFOS FORICI COLINESTERASI INIBITORI: BEI ACGIH:70% D'INDIVIDUAL BASE- LINE.VALORE MEDIO: 613</i>		
Note NON CONGELARE. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BAT1	90.86.1	10,75	COLTURALE PER GARZE- PROTESI- PLACENTA- FUNICOLO - MEMBRANA - TESSUTI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore FLACONE PER EMOCOLTURE PEDIATRICHE		Materiale GARZE PROTESI PLACENTA FUNICOLO MEMBRANA TESSUTI		Conservazione / Stabilità Tempi di CONSEGNARE IL PRIMA POSSIBILE IN 10 gg / L – M –	consegna M – G – V MICROBIOLOGIA	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento Negativo		
Note: Contattare sezione Microbiologia Laboratorio Analisi						Data aggiornamento 9/11/2012

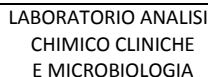

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 46 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COO	90.71.1	???	CO-OSSIMETRIA Per Reparti interni	COOXIMETER	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 1 gg /
SIRINGA EPARINATA		SANGUE (PLASMA Li EPARINA)		REFRIGERARE (CONSEGNA IMMEDIATA)		L – M – M – G – V – S
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
ELETTROCHIMICO		Hct %tHB		Sg-Ematocrito %		
		g/dlsO2 %		Sg-Emoglobina totale : 12-18		
		FO2HB g/dl		Sg-Saturazione O2 : 92-98,5		
		FCOHB g/dl		Sg-Ossiemoglobina : 94-87		
		FMetHB g/dl		Sg-Carbossiemoglobina: non fumatori <1,5 fumatori 1,5 - 5,0		
		F		Sg-Metaemoglobina : 00,1-1,5 (ESPOSIZIONE AD ANILINA ED A INDUTTORI METAGLOBINICI BEI ACGIH: 1.5)		
Note		Sg-Deossiemoglobina : 0,0-5,0				
NON CONGELARE						Data aggiornamento
						11/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 47 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HBCO	90.58.4	???	CO-EMOGLOBINA	CARBOSSI EMOGLOBINA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA K EDTA)		Conservazione / Stabilità REFRIGERARE (NON CONGELARE)	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ELETTROCHIMICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento NON FUMATORI: INF. A 1,5 FUMATORI : 1,5 - 5,0 ESPOSIZ. A MONOSSIDO DI CARBONIO BEI ACGIH: 3.5		
Note NON CONGELARE. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						Data aggiornamento 05/07/2018

COEO	90.62.5	??	CONTEGGIO EOSINOFILI (muco nasale)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale MUCO NASALE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V
2 VETRINI PORTAOGGETTO						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
MICROSCOPICO 400x Camera di Burker		% ELEMENTI CELLULARI		? <i>< 10</i>		
Note						
Si esegue la ricerca microscopica dopo aver strisciato muco nasale, raccolto con tampone sterile, su vetrino.						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TR	90.94.3	8,30	COPROCOLTURA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V – S	
CONTENITORE PER FECI						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
COLTURALE		Negativo				
Note						Data aggiornamento
- Le feci devono essere prelevate possibilmente all’esordio dell’enteropatia quando sono diarroiche e prima dell’inizio della terapia antibiotica. - Il materiale fecale deve essere raccolto evitando la contaminazione con urina. - Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nel contenitore e la quantità del campione deve essere pari a una “noce”. - E’ sconsigliato l’uso di tamponi rettali se non nel caso di neonati. - Il campione deve essere seminato nel più breve tempo possibile; il campione va conservato a temperatura ambiente per massimo 5 ore.						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CORM	90.15.3	11,50	CORTISOLO MATTINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 43-224		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 48 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CORS	90.15.3	11,50	CORTISOLO SERA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 31-116		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CORU	90.15.3	11,50	CORTISOLO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg / L – G
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura mcg/24 hs		Intervalli di Riferimento 28.5-213.7		
NOTE 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						o.

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COTI	PRIVATO		COTININA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE ESTEMPORANEE		TEMPERATURA AMBIENTE		7 gg /L-M-M-G-V-
Metodo		Unità di misura mcg/l		Intervalli di Riferimento		
EIA				CUT-OFF: 350		
Note: analisi svolta su urine del mattino o estemporanee. Campioni non consegnati immediatamente vanno congelati a -20 °C ed inviati in apposito contenitore.						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COXAA	13,00		COXACKIE VIRUS A Anticorpi Ig totali		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)	Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – G	
Metodo CFR – FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO		Unità di misura U.A.	Intervallo di Riferimento <1/8 :Negativo 1/8-1/16:Dubbio (**) 1/32 :Basso Positivo >1/32:Positivo **:Da ricontrollare a distanza di tempo			
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 49 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
COXAB	91.16.1	5,75	COXACKIE VIRUS B Anticorpi Ig totali		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – G	
Metodo CFR – FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento <1/8 :Negativo 1/8-1/16:Dubbio (**) 1/32 :Basso Positivo >1/32:Positivo **::Da ricontrollare a distanza di tempo		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CREA	90.16.3	1,35	CREATININA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 0,60-1,30		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCRE	90.16.3	1,35	CREATININA URINARIA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura ml/min		Intervalli di Riferimento 0,60-2,50		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCRES	90.16.3	1,35	CREATININA URINARIA estemporanea		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE ESTEMPORANEE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
2 PROVETTE URINE						
Metodo		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento		
ENZIMATICO						
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa						Data aggiornamento
						05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 50 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CRCLE	90.16.4	1,35	CREATININA CLEARANCE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura <i>Diuresi 24h</i> CREATININA SIERO <i>Creatinina urine</i> <i>Creatinina clearance</i> Commento:		Intervalli di Riferimento <i>Mg/dl Uomini: 0.7-1.3</i> <i>Donne: 0.6-1.2</i> <i>mg/dl</i> <i>ml/min. 75-160</i>		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. 5. Presentarsi a digiuno da 8-12 ore perchè In Laboratorio verrà eseguito prelievo di sangue per dosaggio di Creatinina sierica Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa						Data aggiornamento 11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CRIO	90.46.3	1,50	CRIOAGGLUTININE (in sede)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO BLU' (senza gel, senza attivatore)		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità 37° C	Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V	
Metodo AGGLUTINAZIONE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTI		
Note Non centrifugare ma mettere in termostato a 37°C fino a che il siero si separa Prelievo con siringa termostatata a 37°C. NON ESEGUIBILE A DOMICILIO.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CROM	??		CROMO (SIERICO)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO		Materiale SANGUE (SIERO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento < 1.0		
Note						Data aggiornamento 10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CROI			CROMO URINE (Inizio Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 GG	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale:<2 Soggetti professionalmente esposti(i.t.):<25, Aumento durante il turno lavorativo:<10		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro.						Data aggiornamento 10/09/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 51 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FCRO			CROMO Urinario (Fine Turno)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE DI FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento POPOLAZIONE GENERALE <5 Soggetti professionalmente esposti(f.t./f.s.l.):<25, Aumento durante il turno lavorativo:<10		
ASSORBIMENTO ATOMICO						
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UCRE	90.16.3	1,35	CROMOGRANINA A		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento 0 - 84,7 ug/l		
Note: Centrifugare subito e congelare immediatamente. INVIARE IN APOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CTXP			CTX – CROSSLAPS Plasmatico	TELOPEPTIDE C TERMINALE	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 2 gg	
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Uomini: 30 – 50 anni 0.016 – 0.584 > 50 – 70 anni fino a 0.704 70 anni fino a 0.854 Donne: in pre-menopausa 0.025 – 0.573 in post-menopausa 0.104 – 1.008 >		
Note Prelevare il campione a digiuno preferibilmente il mattino; centrifugare entro 3 ore, congelare a -20 °C.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CU	90.39.4	4,35	CUPREMIA (RAME)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO		Materiale SANGUE (SIERO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo ASS. ATOMICO - Fornetto Grafite		Unità di misura µg/dl		Intervalli di Riferimento 25-165		
Note:						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 52 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CUU24	90.39.4	4,35	CUPRURIA (RAME) URINE 24 hs		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTA CAMPIONE URINE 24 ORE		URINE 24 ORE ACIDIFICATE		TEMPERATURA AMBIENTE	5gg/L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura mcg/24h		Intervalli di Riferimento 15 - 70		
ASS. ATOMICO - Fornetto Grafite						
Note						
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						02/04/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CUUFT	90.39.4	4,35	CUPRURIA (RAME) URINE fine turno		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg	
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASS. ATOMICO - Fornetto Grafite		mcg/g Creat		< = 50		
Note						
- L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro						02/04/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G	90.27.1	1,35	GLICEMIA	GLUCOSIO SIERICO	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 74-106		
						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 53 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OGTT	90.26.4	2,15	CURVA GLICEMICA SCREENING DIABETE Basale/120		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 70-110		
Note • Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia • Dare da bere al paziente una soluzione glucosata (75 g di glucosio) • Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. • Eseguire un prelievo dopo 120 minuti. • Durante l’esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall’acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente seduto						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G4D	90.26.5	4,20	CURVA GLICEMICA 5 DETERMINAZIONI Basale/30/60/90/120		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 70-110		
Note Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia • Dare da bere al paziente una soluzione glucosata da 75 g di glucosio. • Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. • Eseguire prelievi dopo 30-60-90-120 minuti • Durante l'esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente sedut).						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G180	90.26.5	4,20	CURVA GLICEMICA 6 DETERMINAZIONI Basale/30/60/90/120/180		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 70-110		
Note • Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia • Dare da bere al paziente una soluzione glucosata da 75 g di glucosio • Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. • Eseguire prelievi dopo 30 – 60 – 90 – 120 – 180 minuti • Durante l'esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente seduto.						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 54 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G240	90.26.5	4,20	CURVA GLICEMICA 8 DETERMINAZIONI Basale/30/60/90/120/150/ 180/240		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 70-110		
Note						Data aggiornamento
• Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia • Dare da bere al paziente una soluzione glucosata da 75 g di glucosio • Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. • Eseguire prelievi dopo 30 – 60 – 90 – 120 – 150 - 180 – 240 minuti • Durante l'esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente sedut						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G3G	90.26.4	2,15	CURVA GLICEMICA PER GRAVIDE Basale/60/120		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento basale < 92 dopo 60' < 180 dopo 120' <153		
Note Curva per Gravide - Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia - Dare da bere al paziente una soluzione glucosata (75 g di glucosio) - Eseguire un prelievo dopo 60 e 120 minuti. - Durante l'esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente sedut).						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
I180	90.28.5	26,95	CURVA INSULINEMICA 6 DETERMINAZIONI Basale/30/60/90/120/180		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura µm/ml		Intervalli di Riferimento 3-25,0		
Note						Data aggiornamento
• Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia • Dare da bere al paziente una soluzione glucosata da 75 g di glucosio • Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. • Eseguire prelievi dopo 30 – 60 – 90 – 120 – 180 minuti • Durante l'esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente sedut						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 55 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
I240	90.28.5	26,95	CURVA INSULINEMICA 8 DETERMINAZIONI Basale/30/60/90/120/150/ 180/240		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura µm/ml		Intervalli di Riferimento 3-25,0		
Note						Data aggiornamento
- Eseguire il prelievo di sangue basale e verificare la glicemia - Dare da bere al paziente una soluzione glucosata da 75 g di glucosio - Se la curva viene eseguita ad un bambino, si deve calcolare 1.75 g di glucosio per ogni Kg di peso, fino ad un massimo di 75 g. - Eseguire prelievi dopo 30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 180 – 240. - Durante l’esecuzione dei test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall’acqua , non deve fumare e deve rimanere possibilmente sedut						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
CYFRA	90.61.3	18,65	CYFRA 21		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento <3,30		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DAMIO			DESETIL AMIODARONE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 20 gg
Metodo HPLC		Unità di misura mg/L		Intervalli di Riferimento 1,0-5,0		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DESS			DESOSSIPIRIDINOLINA/ PIRIDINOLINA URINARIA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg
Metodo HPLC-Colorimetrico		Unità di misura pmol/µmol Creat		Intervallo di Riferimento Piridinolina: Piridinolina: Donne pre-menopausa: 25 - 63 Donne post-menopausa: 62 - 126 Uomini : 20 - 52 Desossipiridinolina: Donne pre-menopausa: 6.0 - 13.5 Donne post-menopausa 12.0 - 23.4 Uomini 5.0 - 11.0		
Note						Data aggiornamento
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/01/2015

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 56 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DHEA	90.17.2	13,60	DHEA SOLFATO (DHEAS)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura mcg/ml		Intervallo di Riferimento UOMO: 0.60 - 4.90 DONNA: 0.60 - 3.70 PREPUBERI: INF. A 0.90		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DIBU			NUMERO DI DIBUCAINA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo CALCOLO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento NORMALI >75 ETEROZIGOTI 25-75 OMOZIGOTI 0-25		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
??	90.61.4		D- DIMERO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO AZZURRO		Materiale SANGUE (PLASMA Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE (VEDI NOTA)		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura µg/l		Intervallo di Riferimento < 500		
Note Centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti. CONGELARE (surnatante: almeno 1 ml di plasma) SE NON INVIATO IN LABORATORIO ENTRO TRE ORE DALLA RACCOLTA. SE CONGELATO INVIARE IN LABORATORIO IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DIGO	90.21.1	9,75	DIGOSSINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml		Intervallo di Riferimento 0,8-2,0-TERAPEUTICA >2,0 -TOSSICITA'		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 57 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DHSV	91.19.4 + 91.36.5		DNA - HERPES SIMPLEX 1-2		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 10 GG/L-M-M-G-V-
Metodo PCR-RT		Unità di misura		Intervalli di Riferimento Negativo		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C . - Inviare in Laboratorio in apposito contenitore						Data aggiornamento 10/1/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DNA	90.48.3	10,50	DNA NATIVO Anticorpi		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IFI		Unità di misura Titolo		Intervalli di Riferimento <1/10		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DNASI	90.09.1	4,10	DNASI B Anticorpi		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L
Metodo NEFELOMETRIA		Unità di misura ul/mL		Intervalli di Riferimento <200		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 58 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DOPA	90.18.1	11,70	DOPAMINA URINARIA (catecolamine libere urinarie)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTE DA URINA		URINA DELLE 24 h		URINE ACIDIFICATE	8 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura Diuresi .. mL.....: Adreanalina (Epinefrina) .. ug/24H....: Noradrenalina (Norepinefrina) .. ug/24H Dopamina .. ug/24H.....:		Intervalli di Riferimento 2-22 20-81 120-400		
HPLC-FLUORIMETRIA						
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso. 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. La ricerca si esegue nelle urine di 24 ore raccolte in contenitore con 10 cc. di acido acetico al 30%. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
		11,70	DOPAMINA PLASMATICA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale PLASMA		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V
Metodo HPLC		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento < 30		
Note Prelevare 7 ml di sangue venoso in provetta contenente K-EDTA come anticoagulante. Centrifugare subito dopo a 3000 rpm per 3 minuti in centrifuga refrigerata (4°C). Prelevare circa 3 ml di plasma . Congelare il campione a – 20 °C ed inviare il campione negli appositi contenitori a – 20 °C.						Data aggiornamento
						17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UKL	90.12.F	16,40	DOSAGGIO CATENE LEGGERE KAPPA URINARIE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 5 gg
2 PROVETTA DA URINA		URINA DELLE 24 h		TEMPERATURA AMBIENTE		/ L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNONEFELOMETRIA		g/l		ASSENTE		
Note						Data aggiornamento
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00)						
2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chius						
3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore						9/11/2012
4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 59 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SCATK	90.17.F	16,4	DOSAGGIO CATENE LEGGERE KAPPA Sieriche		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – G	
Metodo IMMUNONEFELOMETRIA		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento 1,7-3,7		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ULK	90.12.F	16,40	DOSAGGIO CATENE LEGGERE LAMBDA URINARIE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
1 PROVETTA DA URINA		URINA DELLE 24 h		TEMPERATURA AMBIENTE		
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNONEFELOMETRIA		g/l		ASSENTE		
Note Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso. 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SCATL	90.12.F	16,4	DOSAGGIO CATENE LEGGERE LAMBDA Sieriche		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – G	
Metodo IMMUNONEFELOMETRIA		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento 1,1-2,4		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ECHI	90.92.2	6,85	ECHINOCOCCO Anticorpi Ig Totali		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / MA – ME – V	
Metodo CFR –FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO		Unità di misura Titolazione		Intervalli di Riferimento < 1/16 :Negativo 1/16-1/32:Positivo debole da controllare a distanza di tempo > 1/32 :Positivo		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 60 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ECP			ECP – PROTEINA CATIONICA	EOCP	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / MA – ME – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml	Intervalli di Riferimento <24			
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ELP			ELASTASI 1 PANCREATICA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE PER FECI		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità IN FRIGO	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura µg/g di feci	Intervalli di Riferimento >200			
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EP	90.38.4	6,85	ELETTROFORESI PROTEICA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ELETTROFORESI SU GEL		Unità di misura Albumina % Alfa 1 % Alfa 2 % Beta % Gamma %	Intervalli di Riferimento 52-70 1,50-4,0 9,0-14,0 9,0-15,0 1,0-2,0			
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EPU	90.38.4	6,85	ELETTROFORESI PROTEICA URINARIA (24 hs o estemporanee)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINA 24 hs O ESTEMPORANEA		Materiale URINA		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ELETTROFORESI SU GEL		Unità di misura Albumina % g/l Alfa 1 % g/l Alfa 2 % g/l Beta % g/l Gamma % g/l TIPO DI CAMPIONE DIURESIS ml PROTEINE ELIMINATE g/24 hs	Intervalli di Riferimento ASSENTE < 0.15			
Note Per urine 24 hs vedere modalità raccolta (es. 17 chetosteroidi)						Data aggiornamento 05/07/2018

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 61 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EMBA	90.94.1	23,35	EMOCOLTURA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
TERRENI SPECIFICI		SANGUE		TEMPERATURA AMBIENTE PER 48 ORE		6 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
DETERMINAZIONE CON ANALIZZATORE AUTOMATICO				Negativa		
Note Avvisare Sezione Microbiologia Laboratorio Analisi						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EMOC	91.36.5 + 91.29.4		EMOCROMATOSI DNA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg
Metodo PCR REAL TIME		Unità di misura Allele normale		Intervalli di Riferimento		
Note: Note Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
E	90.62.2	4.10	EMOCROMO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Laterale ANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo CONTEGGIO CON ANALIZZATORE AUTOMATICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
E1	90.62.2	4,10	EMOCROMO SENZA FORMULA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO (TAPPO VIOLA)		Materiale SANGUE (PLASMA-EDTA)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo CONTEGGIO CON ANALIZZATORE AUTOMATICO		Unità di misura		Intervali di Riferimento Leucociti x10e3/microl Eritrociti x10e6/microl Emoglobina g/dl Ematocrito % Vol. globulare medio fl Cont. Medio emoglobina pg Conc. Media emoglobina x10g/l Distr. Volum. Eritrocitaria % Distr. Conc. Emoglobinica x10g/l Piastrine x10e3/microl Vol. medio piastrinico fl Distr. Vol. piastrinica % Piastrinocrito %		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 62 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EGV	89.65.1	14,80	EMOGASANALISI VENOSO		NO	
Tipologia provetta / contenitore SIRINGA EPARINATA		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità IN BAGNO DI GHIACCIO (CONSEGNA IMMEDIATA)		Tempi di consegna 2 gg / M E
Metodo ELETTROCHIMICO		Unità di misura pH mmHg pO2 mmol/l HCO – std mmHg pCO2 mmol/l HCO -act mmol/l BE –(B)		Intervalli di Riferimento Sg-pH : 7,32-7,42 Sg-pCO2 : 39-52 Sg-pO2 : 30-50 Sg-HCO3-attuali : 23-27 Sg-HCO3 standard : 23-27 Sg-Eccesso Basi : < 2,0		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HBGL	90.28.1	9,35	EMOGLOBINA GLICOSILATA HbA1c		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V
Metodo HPLC		Unità di misura Mmol/Mol %		Intervalli di Riferimento IFCC 20-42- Mmol/Mol DCCT 4-6 - %		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HBEPN	90.66.5	12,70	ASSETTO EMOGLOBINICO (ev. EMOGLOBINE PATOLOGICHE)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo SEPARAZIONE ELETTROFORETICA		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento A 0-6 mesi: 15-50 Adulto :> 96.5 A2 : < 2.0 Fetale : < 3.5 Anomale Hb S, HbC, HbD, ecc: Assente		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 63 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AMBG	PRIV	21	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale PLASMA (K EDTA)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg /LU- MA-ME-GIO-VE	
1 PROVETTA TAPPO VIOLA						
Metodo		Unità di misura varie		Intervalli di Riferimento WBC : 4.5-11.0 X 10^3/mcl RBC:4.20-5.40 X 10^6/mcl HGB: 120-160 g/l HCT:28.0-42.0 % MCV:81.0-99.0 fl MCH:27.0-33.0 pg MCHC:320-360 g/l RDW:11.5-14.5 % HDW:2.20-3.20 g/dl PLT:130-400 X 10^3/mcl NEUTROFILI: 50.75 % LINFOCITI: 25-48 % MONOCITI: 3.0-9.0 % EOSINOFILI: 0.0-7.0 % BASOFILI: 0.0-1.5 % LUC : 0.0-4.0		
Analizzatore automatico						
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			Ena SCREENING		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EIA		Unità di misura AI		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla JO SC MS RN SS SB CENEP	Codice Regionale 90.47.7 90.47.7 90.47.8 90.47.B 90.47.C CENEP	Ticket	Analita ENA PROFILO Ena antigene JO Ena antigene SC Ena antigene MS Ena antigene RN Ena antigene SS (Ro) Ena antigene SB (La) Anticorpi CENTROMERO	Sinonimo	Ric. Urgente NO	Laboratorio INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IFI		Unità di misura TITOLO		Intervalli di Riferimento < 1/40		
Note						Data aggiornamento 05/07/2018

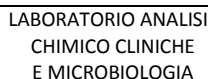

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 64 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FEBVG	91.21.1	11,90	EPSTEIN BARR VIRUS VCA anticorpi IGM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EIA		Unità di misura E.A.		Intervallo di Riferimento < 20 : NEGATIVO > 20 : POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 65 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FEBVG	91.21.1	11,90	EPSTEIN BARR VIRUS VCA anticorpi IG Totali		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EIA		Unità di misura E.A.		Intervalli di Riferimento < 20 : NEGATIVO > 20 : POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
EARLY	91.21.1	11,90	EPSTEIN BARRA EA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg I-L-M-M-G-V-S
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 10 NEGATIVO 10-40 DUBBIO >40 POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ERIP	90.18.5	15,55	ERITROPOIETINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura mU/ml		Intervalli di Riferimento 4.3-29.0		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ESCR	90.93.3	5,90	ESPETTORATO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
CONTENITORE STERILE		ECREATO DEL MATTINO		TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE	5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
COLTURALE		Negativo				
Note: contattare Servizio Microbiologia del Laboratorio.						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 66 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ESCR	91.39.4	5,90	ESAME CITOLOGICO URINE (ricerca cell. neopl.)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE STERILE		Materiale Vedere descrizione raccolta urine per citologia urinaria		Conservazione / Stabilità Tempi di TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE 5 gg / L – M – M –	consegna G – V	
Metodo Mic.-color. secondo Papanicolau		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTI o RICERCA NEGATIVA		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	91.39.7	??	ESAME CITOLOGICO MAMMARIO (ricerca cell. neopl.) (ESAME CITOLOGICO DI SEDE NAS (Fino a 5 vetrini e/ocolorazioni)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
VETRINO		SECRETO MAMMARIO		TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE		5 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Mic.-color. secondo Papanicolau				ASSENTI o RICERCA NEGATIVA		
Note						Data aggiornamento
Si esegue su secreto mammario. Ad ogni vetrino deve corrispondere un'unica sede di prelievo						
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ESCR	91.39.4	5,90	ESAME CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE (Colpocitologia)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
PAP TEST		PAP-TEST		TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE		5 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Mic.-color. secondo Papanicolau						
Note L'esame si esegue tra 11 e 18 giorno del ciclo. Interferenze sui risultati possono derivare da una non corretta procedura di prelievo. Lavande vaginali e rapporti sessuali debbono essere sospesi 48-72 ore prima del prelievo. ESENTE PER GRAVIDANZA: in epoca preconcezionale						Data aggiornamento
						10/01/2015

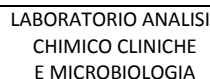

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 67 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
E2	??	11,50	ESTRADIOLO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE(siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOMETRICO		pg/ml		Descr.Aggr.8 - 43 Descr.Aggr.DONNA FASE FOLL.: 12 - 160 Descr.Aggr." PICCO OVUL.: 80 - 500 Descr.Aggr." FASE LUT.: 44 - 210 Descr.Aggr." Descr.Aggr." 1.TRIM.GRAV.: 150 - 4100 Descr.Aggr." 2.TRIM.GRAV.: 4100 - 6800 Descr.Aggr." 3.TRIM.GRAV.: 6800 - 19000 Descr.Aggr." MENOPAUSA : 0 - 54		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 68 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ETAN	90.19.3	11,50	ETANOLO PLASMATICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
1 PROVETTA TAPPO VIOLA		SANGUE (EDTA)		TEMPERATURA AMBIENTE (<u>provetta tappata ermeticamente</u>)		
Metodo		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento		
ENZIMATICO				ASSENTE		
Note						Data aggiornamento
Sensibilità' del metodo:10 mg/dl.						05/07/2018
Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ETANU	90.19.3	11,50	ETANOLO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE ESTEMPORANEE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE (provetta tappata ermeticamente)	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento ASSENTE		
Note Sensibilità' del metodo:10 mg/dl Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ETO	90.20.2	8,05	ETOSUCCIMIDE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V
Metodo hplc		Unità di misura µg/ml		Intervalli di Riferimento 40-100		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 69 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FII	90.64.3	12,65	FATTORE II		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 15 gg
Metodo COAGULOMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 120		
Note Separare subito dopo il prelievo e congelare. - Prelevare il sangue intero e dispensare in provetta da 5 ml con fondo a U contenente Na Citrato (1 parte di Na Citrato + 9 parti di sangue intero); - agitare delicatamente per inversione almeno 3 volte; - centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti; - prelevare una aliquota di surnatante di almeno 1 ml e congelare rapidamente a - 20 °C; - inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DFII	91.29.4 91.36.5		FATTORE II DNA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
Metodo PCR-RT		Unità di misura		Intervalli di Riferimento I ALLELE: NON MUTATO II ALLELE: NON MUTATO OMOZIGOTE : NON MUTATO		
Note NON CONGELARE						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FINT	31,50		FATTORE INTRINSECO Anticorpi		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg
Metodo		Unità di misura RU/ml		Intervalli di Riferimento < 20,00 negativo		
Note In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni. Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C.						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RF	90.64.2	4,20	FATTORE REUMATOIDE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura UI/ml		Intervalli di Riferimento <18		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 71 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VIII Abs	90.64.3	12,65	FATTORE VIIIc Anticorpi		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 12 gg	
Metodo		Unità di misura BU/ml		Intervalli di Riferimento fino a 0.5		
Note Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente: 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati. Inviare in apposito contenitore a -20°C.						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FX	90.64.3	12,65	FATTORE IX		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA PER COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 12 gg	
Metodo COAGULOMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 120		
Note						
Prelevare il sangue intero e dispensare in provetta da 5 ml con fondo a U contenente Na Citrato (1 parte di Na Citrato + 9 parti di sangue intero); • agitare delicatamente per inversione almeno 3 volte; • centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti; • prelevare una aliquota di surnatante di almeno 1 ml e congelare rapidamente a - 20 °C; • Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FX	90.64.3	12,65	FATTORE X		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA PER COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 12 gg
Metodo COAGULOMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 120		
Note Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente: 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FXI	90.64.3	12,65	FATTORE XI		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 10 gg
Metodo COAGULOMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 120		
Note Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente: 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						11/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 72 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FXII	90.64.3	12,65	FATTORE XII (Hageman)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo COAGULOMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 150		
Note Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente: 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FXII	90.64.3	12,65	FATTORE XIII		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Plasma Na Citrato)		Conservazione / Stabilità Tempi di CONGELARE 12 gg		consegna
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70 - 140		
Note Durante il prelievo scartare i primi ml di sangue. Centrifugare immediatamente: 2 volte a 3000 g per 20 min. Scartare i campioni emolizzati Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FDP	90.64.5	12,65	FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCTS (FDP)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE/CONGELATO (vedi nota)	Tempi di consegna 4 gg	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura µg/ml		Intervalli di Riferimento < 5		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C. - Inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 73 di 154 Allegati n.: 0	
					LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OS	90.21.4	3,40	FECI RICERCA SANGUE OCCULTO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE PER FECI		Materiale FECI	Conservazione / Stabilità IN FRIGO		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOCROMATOGRAFICO		Unità di misura ng/ml	Intervalli di Riferimento 0 - 50: NEGATIVO 51 - 99: DUBBIO >= 100 : POSITIVO			
Note Al fine di una corretta ed attendibile esecuzione del test è necessario attenersi a quanto segue: Durante i tre giorni precedenti il test: 1. Non fare uso di lassativi • Raccogliere una quantità di feci pari a una “noce”. Il campione da esaminare deve pervenire al laboratorio il più presto possibile. Il materiale biologico può essere conservato in frigo a 2°-8°al massimo per 24 ore.						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FECI	90.22.1	4,30	FENITOINA (Difenilidantoina)	DINTOINA	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)	Conservazione / Stabilità IN FRIGO		Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura microg/ml	Intervalli di Riferimento Range terapeutico: 10.0 - 20.0			
Note						Data aggiornamento 11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FB	90.09.3	7,10	FENOBARBITAL Gardenale	Gardenale	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)	Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo EMIT		Unità di misura microg/ml	Intervalli di Riferimento CONCENTRAZ. TERAPEUTICA: 10-40 Concentraz. tossica: > 60			
Note						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FENUI	??	??	FENOLO (Urine Inizio Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE DI INIZIO TURNO	Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg	
Metodo HPLC		Unità di misura mg/g Creat.	Intervalli di Riferimento Popolazione generale: < 20 Soggetti professionalmente esposti a fenolo totale: < 250 (f.t.)			
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 74 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FENUF	??	??	FENOLO (Urine Fine Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE DI FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg
Metodo HPLC		Unità di misura mg/g Creat.		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: < 20 Soggetti professionalmente esposti a fenolo totale: < 250 (f.t.)		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FRT	90.22.3	11,50	FERRITINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		2 gg / L – M – M – G – V
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA DIRETTA				femmina 10-290 maschi 22-322		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FE	90.22.5	2,30	FERRO - SIDEREMIA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura µg/dl		Intervalli di Riferimento femmina 40-145 maschi 60-160		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FIB	90.65.1	2,30	FIBRINOGENO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE/VEDI NOTA	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COAGULATIVO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 200-400		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C . - Inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 75 di 154 Allegati n.: 0
--	--	---

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FCIS	91.30.1 X 6 + 91.36.5		FIBROSI CISTICA 57 MUTAZIONI		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg
Metodo PCR REAL TIME		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NON MUTATO		
Note						Data aggiornamento
						20/02/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FLU	??	??	FLUORO (Plasmatico)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO		Materiale SANGUE (SIERO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg
Metodo ISE		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento < 30.0 100 – 300 Intervallo terapeutico		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FLUI	??	??	FLUORO URINE (Inizio Turno)		NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		8 GG
Metodo		Unità di misura mg/g Creat.		Intervalli di Riferimento		
ISE				Popolazione generale:<1.0 Soggetti professionalmente esposti:< 2.0		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FLUF	??	??	FLUORO Urinario (Fine Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 GG
Metodo ISE		Unità di misura mg/g Creat.		Intervalli di Riferimento Popolazione generale:<1.0 Soggetti professionalmente esposti:< 3.0		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						10/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 76 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FOGR	90.23.2	8,05	FOLATI ERITROCITARI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 280-791		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FFOLS	90.23.2	8,05	FOLATI SIERICI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/ml	Intervalli di Riferimento > 5,38			
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
YORK3	PRIVATO		FOODINTEST (metodo citotossico) 120 Alimenti		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 GG-L-M-M-G-V-	
Metodo citotossico		Unità di misura		Intervalli di Riferimento VEDI ALLEGATO		
Note						Data aggiornamento
						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
YORK2	PRIVATO		FOODINTEST (metodo citotossico) 60 Alimenti		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 GG	
Metodo CITOTOSSICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento VEDI ALLEGATO		
Note						Data aggiornamento
						10/8/2013

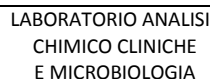

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 77 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
P	90.24.5	1,10	FOSFORO PLASMATICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo FOSFOMOLIBDATO / UV		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 2.5-4.9		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 78 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UP	90.24.3	1,40	FOSFORO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo FOSFOMOLIBDATO / UV		Unità di misura mg/24 ore		Intervalli di Riferimento 400-1300		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FSH	90.23.3	11,50	FSH		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura mUI/ml		Intervallo di Riferimento DONNE: Fase follicolare: 2,5-10,2 Metà ciclo : 3,4-33,4 Fase luteinica : 1,5-9,1 Postmenopausa : 23-116 UOMINI: Adulti e ragazzi: 1,4-18,1		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FT3	90.43.3	11,50	FT3 (T3 FREE)	TRIIODOTIRONINA LIBERA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura pmol/l		Intervalli di Riferimento 3,50-6,50		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FT4	90.42.3	11,50	FT4 (T3 FREE)	TROXINA LIBERA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA DIRETTA		Unità di misura ng/dl		Intervalli di Riferimento 0.93-1.70		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 79 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
G6PD	90.27.2	8,25	G-6-PDH ERITROCITARIA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
Metodo ENZIMATICO CINETICO (UV a 25°C)		Unità di misura U/10^12 Eritrociti		Intervalli di Riferimento 118-144		
Note •NON CONGELARE. Esame non accettabile il VENERDI'						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GAD	90.49.7	9,60	GAD Anticorpi	GAD 65	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L – G	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento < 10 NEGATIVO		
Note: il campione può essere mantenuto a temperatura ambiente se consegnato entro tre ore, dal prelievo, al Vettore di Service. Nel caso l'intervallo di tempo, di cui sopra, fosse superiore alle tre ore si dovrà separare il siero per centrifugazione ed il materiale biologico (siero) dovrà essere congelato a - 20 °C. Il materiale biologico congelato va consegnato nell'apposito contenitore. Comunicare sempre: Comune di nascita, residenza e codice fiscale del Paziente						Data aggiornamento 24/01/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GGT	90.25.5	2,30	GAMMA-GT (GGT)	GGT	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura U/l		Intervalli di Riferimento FEMMINE 5-55 MASCHI 15-85		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GARD	90.83.5	30,10	GARDNERELLA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE E PROVETTA SPECIFICA		laterale VAGINALE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE CONSEGNARE ENTRO 15 MINUTI		Tempi di consegna LU-MA-ME-GIO- PER INTERNI MA - GIO PER ESTERNI
Metodo IBRIDAZIONE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 80 di 154 Allegati n.: 0

GAS	90.94.4- 90.26.190.38.F X2	9,70+10,25+ 9,10X2	GASTRINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento 13-115		
Note CENTRIFUGARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GP	90.94.4- 90.26.190.38.F X2	9,70+10,25+ 9,10X2	GASTROPANEL Gastrina 17 Helicobacter Pylori Pepsinogeno IPepsinogeno II Elaborazione		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento PEPSINOGENO I - 30-165 PEPSINOGENO II - 3 -15 PEPSINOGENO 1-2 3-20 GASTRINA 17 - 1-10 HELICOBACTER PY, <30		
Note: CENTRIFUGATE IL CAMPIONE A 3000 GIRI PER 10 MINUTI, SEPARATE IL SIERO IN UNA PROVETTA E CONGELATE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C.						Data aggiornamento 02/01/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GIA	90.94.6	31,45	GIARDIA Antigene Ricerca diretta		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità IN FRIGORIFERO (2-8 °C) PER 72 ORE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
CONTENITORE PER FECI						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOCROMATOGRAFICO				Negativo		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AGAA	90.49.5	10,10	GLIADINA Anticorpi IGA	AAG Anticorpi anti-Glia lina IgA	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOENZIMATICO (ELISA)		Unità di misura UA/ml		Intervallo di Riferimento < 12 : Negativo 12 - 18 : Dubbio >= 18 : Positivo		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 81 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAGAA	90.49.Z	10,10	GLIADINA Anticorpi anti peptidi deamidati IGA	AAG Anticorpi anti-pep idi deamidati IgA	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento < 5.50 NEGATIVO		
Note: INVIARE ALMENO 700 mcl di siero; se il campione non viene inviato il giorno del prelievo congelare a -20°C Si precisa che l'antigene utilizzato è il peptide deamidato della gliadina						Data aggiornamento 04/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AGAG	90.49.5	10,10	GLIADINA Anticorpi IGG	AAG Anticorpi anti-Glia lina IgG	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo IMMUNOENZIMATICO (ELISA)		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento < 12 : Negativo 12 - 18 : Dubbio >= 18 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAGAG	90.49.Z	10,10	GLIADINA Anticorpi anti peptidi deamidati IGG	AAG Anticorpi anti-peptidi deamidati IgG	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura UA/ml		Intervallo di Riferimento < 10.0 NEGATIVO		
Note: INVIARE ALMENO 700 mcl di siero; se il campione non viene inviato il giorno del prelievo congelare a -20°C Si precisa che l'antigene utilizzato è il peptide deamidato della gliadina						Data aggiornamento
						04/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GPP	90.27.1	1,35	GLICEMIA POST- PRANDIALE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento <140		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 82 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MAG	90.51.3	10,10	GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG Ab		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento <1/20		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012
Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UG	90.27.1	1,35	GLICOSURIA (urine estemporanee)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTE URINE		Materiale URINE ESTEMPORANEE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura g/l		Intervalli di Riferimento ASSENTE		
Note: INVIARE IMMEDIATAMENTE IN LABORATORIO.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UG	90.27.1	1,35	GLICOSURIA (urine 24 hs)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ENZIMATICO COLORIMETRICO		Unità di misura g/24 ore		Intervalli di Riferimento <0,10		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare in Laboratorio al più presto						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GLUCA	90.26.3	7,30	GLUCAGONE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VIOLA(*)		Materiale SANGUE (Plasma KEDTA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 8 gg / L – M – M – G – V
Metodo RIA		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento 40-130		
Note Centrifugare, separare il plasma e congelare. Inviare in apposito contenitore a - 20°C.						Data aggiornamento
						9/11/2012


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 84 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HBCAB	91.18.1	???	HbcAb (Hbc) Anticorpi IgM anti-core virus Epatite B	HBc IgM	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – Me – V	
Metodo ELISA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento 15/07/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANTE	91.18.2	9,70	HBE (HbeAg) (Antigene e virus epatite B)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 4 gg / L – Me – V
Metodo ELISA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento 15/07/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HBE	91.18.4	9,70	HBE-Ab (Anti-Hbe (Anticorpi anti-antigene e virus epatite B)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – Me – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
ELISA						
Note						Data aggiornamento
						15/07/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ANTS	91.18.3	9,70	HbsAb (Anti Hbs) Anticorpi di superficie dosaggio quantitativo virus Epatite B		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ELISA		Unità di misura UI/I		Intervalli di Riferimento <10=NEGATIVO: ASSENZA COPERTURA IMMUNOLOGICA >=10=POSITIVO: PRESENZA COPERTURA IMMUNOLOGICA CA ICA		
Note						Data aggiornamento 15/07/2015

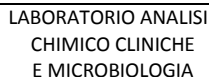

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 85 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
91.19.2			HBV DNA GENOTIPO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE (PLASMA EDTA)		TEMPERATURA AMBIENTE/ REFRIGERARE		10 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
PCR						
Note						Data aggiornamento
SE NON CONSEGNATO SUBITO, SEPARARE E CONSERVARE A 4°C.						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 86 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BIOC	90.27.5	12,60	HCG plasmatiche Test rapido		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo IMMUNOCROMATOGRAFICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento Negativo SENSIBILITA' 25 UI/ml		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HCVR	91.20.1	61,55	HCV RIBA TEST DI CONFERMA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg / L
Metodo IMMUNOBLOTTING		Unità di misura		Intervalli di Riferimento HCV C1 HCV C2 HCV E2 HCV NS3 HCV NS4 HCV NS COMMENTO EPATITE		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GHCv	91.20.9 + 91.36.5		HCV RNA GENOTIPO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA EDTA)		Conservazione / Stabilità CONGELATO	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo IBRIDAZIONE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FHCV	91.19.4 + 91.36.5	40,10+68,35	HCV RNA QUALITATIVO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA EDTA)		Conservazione / Stabilità CONGELATO	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo PCR-RT		Unità di misura UI/ml		Intervalli di Riferimento Limite di sensibilità* : 15		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C						9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 87 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FHCV	91.19.4 + 91.36.5	40,10+68,35	HCV RNA QUANTITATIVO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA EDTA)		Conservazione / Stabilità CONGELATO		Tempi di consegna 10 gg
Metodo PCR- RT		Unità di misura UI/ml		Intervalli di Riferimento Limite di quantificazione: 15 UI/ml		
Note SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 02/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita		Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HCV	91.19.5	9,70	HCV Anticorpi virus Epatite C			NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ECLIA		Unità di misura Negativo		Intervalli di Riferimento			
Note							Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HDV	91.20.3	10,65	HDV VIRUS EPATITE DELTA Anticorpi		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – ME – V	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura Negativo		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HE4	PRIVATO		HE4(Ovarian Cancer Marker)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 12 GG L-M-M-G-V
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura pmol/l		Intervalli di Riferimento < 140		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 88 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HP	90.94.4	9,70	HELICOBACTER PYLORI Anticorpi IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo ELISA		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento < 8 : Negativo 8 - 12 : Dubbio > 12 : Positivo		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HP	90.94.4	9,70	HELICOBACTER PYLORI Ag (feci)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 CONTENITORE FECI		FECI (una noce)		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg / L – M – M – G – V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOENZIMATICO				NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HSV1	91.22.1	9,70	HERPES 1 Anticorpi IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – ME– VE	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HSV12	91.22.1	9,70	HERPES 1-2 Anticorpi IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – ME– VE	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento 9/11/2012

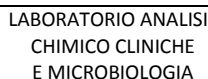

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 89 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FHIV	91.22.3 + 90.36.5	68,35+40,10	HIV 1 RNA QUANTITATIVO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo		Unità di misura Copie/ml		Intervalli di Riferimento LIMITE DI QUANTIFICAZIONE: 20		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. Inviare in apposito contenitore a -20°C						9/11/2012

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI


Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 91 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HLA1	90.78.2 90.78.4 90.79.1 91.36.5	89,60X3 40,10	HLA TIPIZZAZIONE CLASSE I (LOCI A-B-C-)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		laterale ANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG	
1 PROVETTA DA EMOCROMO		S				
Metodo		Unità di misura		Intervali di Riferimento		
PCR-IBRIDAZIONE		LOCUS-A-B-C				
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HLA2	90.81.1 90.80.3 91.36.5	40,10 120,45 188,30	HLA TIPIZZAZIONE CLASSE II (LOCI DQ-DR)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		laterale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA EMOCROMO		LINGUE		TEMPERATURA AMBIENTE	10 GG	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
PCR-IBRIDAZIONE						
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HLAB	90.78.4 91.36.5	89,60 40,10	HLA-DNA TIPIZZAZIONE HLA-B		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE		TEMPERATURA AMBIENTE		15 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
PCR -IBRIDAZIONE		LOCUS-B				
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HLAC	90.79.1 91.36.5	89,60 40,10	HLA-DNA TIPIZZAZIONE HLA-C		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		laterale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA EMOCROMO		S INQUE		TEMPERATURA AMBIENTE		15 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
PCR -IBRIDAZIONE		LOCUS-C				
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

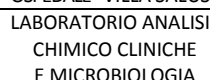

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 92 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IDRUF	??	??	IDROSSIPIRENE (Urine Fine Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 GG	
Metodo HPLC-FLUORIMETRICO		Unità di misura µg/g Creat		Intervallo di Riferimento Popolazione generale (non fumatori): 0.03 - 0.3 Soggetti professionalmente esposti: < 2.7 Popolazione generale (fumatori): 0.05 - 0.7		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente possono essere conservati a +4° C circa.						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 93 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RAST	90.68.2	???	IGE SPECIFICHE (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 GG/L-M-M-G-V-S-
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura KU/L		Intervalli di Riferimento Interpretazione Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
Note TARIFFA APPLICATA PER CIASCUNA VOCE SINGOLARMENTE RICHIESTA						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FMAST	90.68.1	103.75	IGE SPECIFICHE INALANTI-ALIMENTARI MASSIMO 12 ALLERGENI (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M-M-G-V- S
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura KU/L		Intervalli di Riferimento Interpretazione Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RAST2	90.68.1	103,75	IGE SPECIFICHE INALANTI-ALIMENTARI MASSIMO 12 ALLERGENI (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L-M-M-G-V-S	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura KU/L		Intervalli di Riferimento Interpretazione Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RAST1	90.38.1	103.75	IGE SPECIFICHE INALANTI-ALIMENTARI MASSIMO 12 ALLERGENI (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 GG/L-M-M-G-V-S-
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura KU/L		Intervalli di Riferimento Interpretazione Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 94 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IGGE1		94	PANNELLO IGE SPECIFICHE ALIMENTARI 13 ALLERGENI (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		5 GG/L-M-M-G-V-S-
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
EIA		KU/L		Interpretazione		
				Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
						Data aggiornamento
						25/02/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IGGE2		874	PANNELLO IGE SPECIFICHE INALANTI 12 ALLERGENI (RAST)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 GG/L-M-M-G-V-S-	
Metodo EIA		Unità di misura KU/L		Intervalli di Riferimento Interpretazione Classe:II 0,70-3,49 Classe:III 3,50-17,49 Classe:IV 17,50-52,49 Classe:V 52,50-99,99 Classe:VI >100		
						Data aggiornamento
						25/02/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IGEE	90.68.3	10,95	IGE TOTALI (PRIST)	PRIST	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 4gg / L – M – M – G – V – S
Metodo EIA		Unità di misura IU/ml		Intervalli di Riferimento < 200		
Note						Data aggiornamento
						15/07/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IG1	90.68.4x4	13,70X4	IGG IMMUNOGLOBULINE SOTTOCLASSI		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg L-M-M-G-V-
Metodo IMMUNODIFUSIONE RADIALE		Unità di misura g/l		Intervallo di Riferimento Ig1 4,9-11,4 Ig2 1,5-6,4 Ig3 0,2-1,1 Ig4 0,08-1,4		
Note: il campione può essere mantenuto a temperatura ambiente se consegnato entro tre ore, dal prelievo, al Vettore di Service. Nel caso l'intervallo di tempo, di cui sopra, fosse superiore alle tre ore si dovrà separare il siero per centrifugazione ed il materiale biologico (siero) dovrà essere congelato a - 20 °C. Il materiale biologico congelato va consegnato nell'apposito contenitore.						Data aggiornamento 16/04/2015

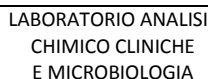

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 95 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IFU	90.69.2	26,20	IMMUNOFISSAZIONE URINARIA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE	Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 5 gg	
Metodo ELETTROFORESI e IMMUNOFISSAZIONE su GEL AGAROSIO		Unità di misura	Intervalli di Riferimento Reazione IgG :NEGATIVA Reazione IgA: NEGATIVA Reazione IgM: NEGATIVA Reazione Kappa: NEGATIVA Reazione Lambda: NEGATIVA Commento:			
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 3. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 4. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 5. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recipitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente possono essere conservati a +4° C circa.					Data aggiornamento 05/07/2018	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IMD	PRIVATO		IMMUNOGLOBULINA D (IgD)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg	
Metodo immunodifusione radiale		Unità di misura mg/L		Intervalli di Riferimento 1,30-152,7		
Note						Data aggiornamento

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 96 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IGG	90.69.4	5,15	IMMUNOGLOBULINA-G (IgG)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento O - 1 MESE: 290 - 1100 1 - 12 MESI: 250 - 700 1 - 12 ANNI: 450 - 1500 ADULTI: 700 - 1600		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

IGG	90.69.4	5,15	IMMUNOGLOBULINA-M (IgM)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 0 - 1 MESE: 12 - 73 1 - 12 MESI: 37 - 142 1 - 12 ANNI: 45 - 222 ADULTI: 40 - 230		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
INB	PRIVATO		INIBINA B	INIBINA B	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità REFRIGERARE/CONGELARE (VEDI NOTA)	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento Uomini: 25-325 Donne: <341 Donne 3° giorno ciclo:<273 Donne post menopausa: <4 Bambini (<15 anni): 4-352 Bambine (< 15 anni): <83		
Note Inviare il siero separato a 4° C se l' invio del campione avviene entro la giornata del prelievo. In caso contrario inviare il siero separato e congelato a – 20 °C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ICA	90.50.5	7,55	INSULA ICA Anticorpi	ICA Abs	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 4 gg
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura IU/ml		Intervalli di Riferimento < 20		
Note: Centrifugare e congelare. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 04/11/2016

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 97 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
INS	90.29.1	8,50	INSULINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura µU/ml		Intervalli di Riferimento 3,00-25,00		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IA2	PRIVATO		INSULINOMA ANTIGENE	IA2	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO (*)		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / MA-VE	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento < 28		
Note: Centrifugare e congelare. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento
						04/11/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			INTERLEUCHINA 6		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO (*)		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 7 gg / MA-VE	
Metodo ECLIA		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento < 5.9		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
IST	PRIVATO		ISTAMINA PLASMATICA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (plasma)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 10 gg / MA-VE	
Metodo RIA		Unità di misura nmol/l		Intervalli di Riferimento < 10,0		
Note CENTRIFUGARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE a - 20°C.						Data aggiornamento

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 98 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
JAK2	91.29.4 91.36.5 91.36.1	40,10 35,75 106	JAK2	V617F	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA EMOCROMO		LINGUE		TEMPERATURA AMBIENTE		9 GG/L-M-M-G-V-
Metodo		S				
PCR REAL TIME		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LAC	90.46.5	4,10	LAMOTRIGINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G
Metodo HPLC-SPETTROMETRIA DI MASSA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note: Comunicate sempre: Comune di nascita, residenza e codice fiscale del Paziente						Data aggiornamento
						24/01/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LAT	90.02.5	4,65	LATTATO (Acido Lattico)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità CONGELATO	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE (K-EDTA)			7 gg/L-M-M-G	
Metodo		Unità di misura mg/100 ml		Intervalli di Riferimento		
ENZIMATICO				4,50-19,80		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C. - INVIALE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 05/07/2018


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LDH	90.29.2	??	LATTICO DEIDROGENASI (LDH)	LAD	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO (*)		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura U/l (37 °C)		Intervalli di Riferimento 230-460 (varia con età)		
Note						Data aggiornamento
						20/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 99 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LATFE	90.29.2	??	LATTOFERRINA FECALE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 CONTENITORE FECI STERILE		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G
Metodo IMMUNOCROMATOGRAFICO-ELISA		Unità di misura U/l (37 °C)		Intervalli di Riferimento NEGATIVA		
Note La ricerca si esegue su campione di feci raccolto in contenitore sterile						Data aggiornamento
						20/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	90.95.2	16,30	LEGIONELLA PNEUMOPHILA Abs LEG.URIN.Ag		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / MA-VE
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento Contenuto di IgG specifiche P/N compreso fra 0 e 2,5 non rilevabile o basso P/N compreso fra 2,5 e 6 medio P/N compreso fra 6 e 9 elevato P/N superiore a 9 molto elevato		
EIA						
Note						Data aggiornamento
						09/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LEPTO	90.96.5	8,45	LEPTOSPIRA anticorpi Ig M		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/-MA
Metodo EIA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTI		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

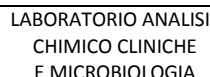

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 100 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LIP	90.30.2	2,85	LIPASI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo		Unità di misura U/l		Intervallo di Riferimento 73-393		
ENZIMATICO						
Note						Data aggiornamento

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 101 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BAT	90.86.1	10,75	LIQUIDI CAVITARI Pleurico, Pericardico, Peritoneale, Sinoviale Raccolte, Ascessuali Drenaggi Esame Batteriológico			INTERNO
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE SPECIFICO STERILE		Materiale LIQUIDI VARI		Conservazione / Stabilità 72 ORE TEMPERATURA AMBIENTE CONTENITORE BACTEC PEDS	Tempi di consegna	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note: CONSEGNA IMMEDIATA AL LABORATORIO. Contattare la Sezione di Microbiologia del Laboratorio.						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BAT2	90.86.1	10,75	LIQUOR Esame BATTERIOLOGICO			INTERNO
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE SPECIFICO STERILE		Materiale LIQUOR		Conservazione / Stabilità 72 ORE TEMPERATURA AMBIENTE CONTENITORE BACTEC PEDS	Tempi di consegna	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NESSUNA CRESCITA BATTERICA		
Note: CONSEGNA IMMEDIATA AL LABORATORIO. Contattare la Sezione di Microbiologia del Laboratorio.						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LI	90.32.2	3,70	LITIO		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G	
Metodo Ass.ATOMICO		Unità di misura mEq/l		Intervallo di Riferimento 0.30-0.90 >2,0 CONCENTRAZIONE TOSSICA		
Note OSSERVAZIONE: I VALORI DALLA ULTIMA ASSUNZIONE. DI RIFERIMENTO ESPRIMONO IL LIMITE EUROPEO DI TOSSICITA' A 12 ORE						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
LAC	90.46.5	4,10	LUPUS ANTICOAGULANTE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELATO/VEDI NOTA	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G	
Metodo COAGULATIVO (CLAUSS)		Unità di misura < 1.20		Intervalli di Riferimento		
Note se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C . Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 102 di 154 Allegati n.: 0

MG	90.32.5	1,50	MAGNESIO PLASMATICO (siero)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 1.8-2.4		
Note						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UMG	90.32.5	1,50	MAGNESIO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COLORIMETRICO		Unità di misura mg/24h		Intervalli di Riferimento 25-255		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HG	??	??	MERCURIO (Plasmatico)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale SANGUE (PLASMA Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
1 PROVETTA TAPPO VERDE						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASSORBIMENTO ATOMICO		µg/l		< 15		
Note: Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HGUI	??	??	MERCURIO URINE (Inizio Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		12 GG
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASSORBIMENTO ATOMICO		µg/gCreat		Soggetti professionalmente esposti(i.t.):<20		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/09/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 103 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HGUF	??	??	MERCURIO URINE (Fine Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE DI FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 12 gg	
1 PROVETTA DA URINA						
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
ASSORBIMENTO ATOMICO		µg/gCreat	Soggetti professionalmente esposti(f.t./f.s.l.):<20			
Note						Data aggiornamento
						10/09/2015
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
METD	PRIVATO		METADONE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore URINE PER DROGHE D'ABUSO		Materiale URINE ESTEMPORANEE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE CONTATTARE LABORATORIO ANALISI	Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V- SU APPUNTAMENTO	
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note CONTATTARE LABORATORIO ANALISI						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
METHB	90.71.1	???	METAEMOGLOBINA	FERRI EMOGLOBI JA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA K EDTA)		Conservazione / Stabilità REFRIGERARE (NON CONGELARE)	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo 						

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MEFR	PRIVATO		METANEFRIE URINARIE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE ACIDIFICATE		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna 10 gg / L-M-M-G-V-	
Metodo HPLC-FLUORIMETRICO		Unità di misura µ/24h		Intervalli di Riferimento 52-341		
Note					o.	
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00)					Data aggiornamento	
2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso						
3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore						
4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome.						
Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						
					12/01/2015	

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 104 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MET	??	??	METANOLO (Plasmatico)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA Li Eparina)		TEMPERATURA AMBIENTE		8 gg
Metodo		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFIA				Popolazione generale:< 2		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
METUI	??	??	METANOLO URINE (Inizio Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		8 GG
Metodo		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFIA				Popolazione generale: < 1 Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
METUF	??	??	METANOLO URINE (Fine Turno)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA URINA		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	8 gg	
Metodo		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFIA				Popolazione generale: < 1 Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MEKF			METILETILCHETONE (MEK) Urine Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8GG
Metodo GASCROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: non rilevabile Soggetti professionalmente esposti: <2(f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						06/7/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 105 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MEKI			METILETILCHETONE (MEK) Urine Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8GG
Metodo GASCROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: non rilevabile Soggetti professionalmente esposti: <2(i.t.)		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						Data aggiornamento 06/7/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MIBKF			METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Fine turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE FINE TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 GG
Metodo GASCROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: Non rilevabile Soggetti professionalmente esposti:<1 (f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MIBKI			METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 GG	
Metodo GASCROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: Non rilevabile Soggetti professionalmente esposti:<1 (f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MIBKF			METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 20 GG	
Metodo GASCROMATOGRAFICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: Non rilevabile Soggetti professionalmente esposti:<1 (f.t.)		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + 4°C circa.						10/8/2013

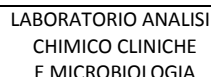

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 106 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MRBG	91.24.3	6,85	MORBILLO Anticorpi IGG		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G	
Metodo ELISA		Unità di misura mUI/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 107 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MRBM	91.24.3	6,85	MORBILLO Anticorpi IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G
Metodo ELISA		Unità di misura mUI/ml		Intervalli di Riferimento ASSENTI		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HCYD	91.29.4 91.36.5	40,10 106	MTHFR A1298C OMOCISTEINA DNA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / MA-VE	
Metodo PCR-RT		Unità di misura		Intervalli di Riferimento I ALLELE NON MUTATO II ALLELE NON MUTATO GENOTIPO OMOZIGOTE NON MUTATO		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
DHCY	91.29.4 91.36.5		MTHFR C677T OMOCISTEINA DNA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / MA-VE	
Metodo PCR-RT		Unità di misura		Intervalli di Riferimento I ALLELE NON MUTATO II ALLELE NON MUTATO GENOTIPO OMOZIGOTE NON MUTATO		
Note						Data aggiornamento

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OM	PRIVATO		MULLERIANO ORMONE Anticorpi		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg / L-MA-ME-G-V-S	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Uomini: 1,3-14,8 Donne: 0,16-12,6 Donne 3° giorno ciclo mestruale: 0,16-10,6 Donne post-menopausa:indosabile Bambini(<15 anni): 3,8- 159,8 Bambine(<15 anni): 0,16-8,9 Limite minimo di rilevabilita' metodo 0,16 ng/ml.		
Note						Data aggiornamento 05/07/2018

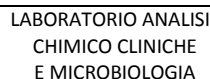

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 108 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MYCM	91.02.5	9,85	MYCOPLASMA PNEUMONIAE anticorpi IGM		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo EIA		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento ASSENTI		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI		Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 109 di 154 Allegati n.: 0
			LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MYCO	91.03.6	16,90	MYCOPLASMI UROGENITALI Campioni Vaginali Campioni Uretrali Campioni Urinari Liquidi Seminali		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA STERILE DA URINA		VAGINALE URETRALE URINA DEL MATTINO LIQUIDO SEMINALE		TEMPERATURA AMBIENTE	3 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
Colturale, biochimico			NEGATIVO			
Note: consegnare immediatamente. Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MYO	90.33.5	6,70	MIOGLOBINA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA CORTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA LI EPARINA)		TEMPERATURA AMBIENTE	1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
ELFA		ng/ml	10-46,0			
Note						Data aggiornamento
						13/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NICK			NICHEL Sierico		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO (*)		SANGUE		TEMPERATURA AMBIENTE	15 GG	
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
ASSORBIMENTO ATOMICO- FORNETTO GRAFITE		µg/l	< 2,00			
Note						Data aggiornamento
						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NICKF	22,90		NICHEL Urinario Fine Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA URINA		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	10 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
ASSORBIMENTO ATOMICO- FORNETTO GRAFITE		µg/creatinina	INF. A 6.0 TENTATIVO DI MASSIMA CONCENTRAZIONE PERMISSIBILE LAUWERYS : 30			
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 110 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NICKI	22,90		NICHEL Urinario Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA URINA		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	10 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASSORBIMENTO ATOMICO- FORNETTO GRAFITE		µg/creatinina		INF. A 2.0 TENTATIVO DI MASSIMA CONCENTRAZIONE PERMISSIBILE LAUWERYS : 30		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
GONO	91.03.5	2,80	NISSERIA GONORRHEAE (gonococco)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
TAMPONE STERILE		VAGINALE URETRALE URINA DEL MATTINO LIQUIDO SEMINALE		TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 48 ORE		7 gg/L-M-M-G-v
Metodo		Unità di misura NEGATIVO		Intervalli di Riferimento		
COLTURALE						
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SNAD	90.04.2	20,20	NORADRENALINA		NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA da EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 8GG/L-M-M-G-V	
Metodo HPLC Note		Unità di misura pg/ml	Intervalli di Riferimento 70 - 480			
Prelevare 7 ml di sangue venoso in provetta contenente K-EDTA come anticoagulante. Centrifugare subito dopo a 3000 rpm per 3 minuti in centrifuga refrigerata (4°C). Prelevare circa 3 ml di plasma . Congelare il campione a – 20 °C ed inviare il campione negli appositi contenitori a – 20 °C.						Data aggiornamento 17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NOFR	PRIVATO		NORMETANEFRINE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTA CAMPIONE URINE 24 ORE		URINE 24 ORE ACIDIFICATE		TEMPERATURA AMBIENTE	10 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC-FLUORIMETRICO		µg/24h		88-444		
Note						Data aggiornamento
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C.						
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 111 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NSE	PRIVATO		NSE (ENOLASI NEUROSPECIFICA)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento < 17.0		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BNP	90.21.2	8,10	NT - proBNP (Brain natriuretic peptide)	FATTORE ATRIALE NATRIURETICO PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE	SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA Li-Eparina)		TEMPERATURA AMBIENTE	2 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ELFA		pg/ml		0-74 ANNI <125 >74 ANNI <450		
Note						Data aggiornamento
						9/11/2012

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita		Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HCY	90.34.6	10,05	OMOCISTEINA			NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura μmol/l		Intervalli di Riferimento 3,70-13,90			
Note Congelare e consegnare negli appositi contenitori.							Data aggiornamento
							10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
HCYM	90.34.6	10,05	OMOCISTEINA DNA (MTHFR) C677T		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo RT-PCR		Unità di misura		Intervalli di Riferimento I ALLELE NON MUTATO II ALLELE NON MUTATO GENOTIPO OMOZIGOTE NON MUTATO		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 112 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OPPI	PRIVATO		OPPIACEI	EROINA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V- SU APPUNTAMENTO	
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento		
Note - L'esame si esegue su appuntamento presso la Segreteria del Laboratorio - Presentarsi allo sportello del Laboratorio con un documento di riconoscimento valido						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
MULLE	PRIVATO		ORMONE ANTI MULLERIANO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO VIOLA		SANGUE		VEDI NOTA		7 L-M-M-G-V-
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 6 Uomini: 1.3 – 14.8 Donne: 0.16 - 12.6 Donne 3° giorno ciclo mestruale: 0.16 - 10 Donne post-menopausa: indosabile Bambini (< 15 anni): 3.8 - 159.8 Bambine (< 15 anni): 0.16 - 8.9		
IMMUNOCHEMICO						
Note Inviare il siero separato a 4° C se l' invio del campione avviene entro la giornata del prelievo. In caso contrario inviare il siero separato a – 20 °C e consegnato negli appositi contenitori..						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ORTI			ORTO-CRESOLO Urine Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 GG
Metodo HPLC-FLUORIMETRICO		Unità di misura mg/ g. Creatin.		Intervalli di Riferimento Soggetti professionalmente esposti Toulene (f.t.) (BEI-ACGIH)< 0.3		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta prima dell'inizio del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ORTF			ORTO-CRESOLO Urine Inizio Turno		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE INIZIO TURNO		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 GG	
Metodo HPLC-FLUORIMETRICO		Unità di misura mg/ g. Creatin.		Intervallo di Riferimento Soggetti professionalmente esposti Toulene (i.t.) (BEI-ACGIH)< 0.30		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del proprio turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento 10/09/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 113 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OSM	90.34.7	9,45	OSMOLARITA' PLASMATICA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 8 gg / L-M-M- G-V
1 PROVETTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA EPARINATO)		TEMPERATURA AMBIENTE		
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Abbassamento punto congelamento		mOsm/l		280-295		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OSMU	90.34.7	9,45	OSMOLARITA' URINARIA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg / L-M-M- G-V	
Metodo Abbassamento punto congelamento		Unità di misura mOsm/l		Intervalli di Riferimento 500-1200		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UOSS	90.35.3	7,90	OSSALURIA URINE 24 ORE		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE ACIDIFICATE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5gg/L-M-M-G-V-	
Metodo ENZIMATICO		Unità di misura mg/24h		Intervalli di Riferimento Uomini 7.0 - 44.0 Donne 4.0 - 31.0 Bambini 13.0 - 38.0 Bambine 13.0 - 38.0		
Note 1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OSTEO	90.35.4	22,45	OSTEOCALCINA			SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE/CONGELATO	Tempi di consegna 5 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Uomini: 18-30 anni: 24-70 30-50 anni: 14-42 >50 anni: 14-46 Donne : premenopausa: 11.0 - 43.0 postmenopausa: 15.0-46.0 Pazienti affl. osteoporosi: 13.0-48.0		
Note: il campione può essere mantenuto a temperatura ambiente se consegnato entro tre ore, dal prelievo, al Vettore di Service. Nel caso l'intervallo di tempo, di cui sopra, fosse superiore alle tre ore si dovrà separare il siero per centrifugazione ed il materiale biologico (siero) dovrà essere congelato a - 20 °C. Il materiale biologico congelato va consegnato nell'apposito contenitore.						Data aggiornamento 16/04/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 114 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
AOVAI	90.53.1	6,55	OVAIO Anticorpi		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 8 gg	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTI		
IMMUNOMETRICO						
Note					Data aggiornamento	
					30/03/2017	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OXCA	90.20.7	19,70	OXCARBAZEPINA (monoidrossicarbamazepina)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg/L-M-M-G-V	
Metodo HPLC		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento 13,0-35,0		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PARF	91.05.2 90.05.4	4,15 4,15	PARASSITI INTESTINALI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg/L-M-M-G-V	
CONTENITORE SPECIFICO						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NON VISIBILI PARASSITI E LORO UOVA		
CHIMICO/MICROSCOPICO						
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PTH	90.35.5	??	PARATORMONE (PTH)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento 11.0 - 79.0		
Note						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 116 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PBD	91.21.4	7,65	PAUL BUNNEL		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo IMMUNOCROMATOGRAFICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PERCL	??	??	PERCLOROETILENE (Plasmatico)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA TAPPO VERDE		SANGUE (PLASMA Li Eparina)		TEMPERATURA AMBIENTE		7 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFIA		mg/l		Popolazione generale: NON RILEVABILE Soggetti professionalmente esposti: < 0.5		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PERCLUI	??	??	PERCLOROETILENE URINE (Inizio Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15 GG	
Metodo GAS CROMATOGRAFIA		Unità di misura mcg/g. Creatin.		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: NON RILEVABILE Non ci sono valori di riferimento in letteratura		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + °C						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PERCLF	??	??	PERCLOROETILENE URINE (Fine Turno)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINA		Materiale URINE DI FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo GAS CROMATOGRAFIA		Unità di misura mcg/g. Creatin		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: NON RILEVABILE Non ci sono valori di riferimento in letteratura		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + °C						Data aggiornamento 10/09/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 117 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PEIGA	90.87.4	8,05	PERTOSSE Anticorpi IgA	BORDETELLA	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ELISA		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento <8.5 : Negativo 8.5-11.5 : Dubbio >11.5 : Positivo		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PEIGG	90.87.4	8,05	PERTOSSE Anticorpi IgG	BORDETELLA	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità Tempi di M-M-G-V	consegna TEMPERATURA AMBIENTE 7 gg/L-	
Metodo ELISA		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento <8.5 : Negativo 8.5-11.5 : Dubbio >11.5 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PEIGM	90.87.4	8,05	PERTOSSE Anticorpi IgM	BORDETELLA	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ELISA		Unità di misura U.A.		Intervalli di Riferimento <8.5 : Negativo 8.5-11.5 : Dubbio >11.5 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ACPLT	90.53.3	77,85	PIASTRINE Anticorpi		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg/ME
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura		Intervalli di Riferimento PLT1 AC.ANTI PLT Iib/III NEGATIVO PLT2 AC.ANTI PLT Ia/Iia NEGATIVO PLT3 AC.ANTI PLT Ia/IX NEGATIVO PLT4 AC. ANTI PLT IV NEGATIVO PLT5 AC.ANTI HLA CLASSE NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 118 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PLT	90.71.3	1,10	PIASTRINE CONTEGGIO		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA EMOCROMO		LINGUE		TEMPERATURA AMBIENTE		1 gg/L-M-M-G-V-S
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CONTEGGIO CON ANALIZZATORE AUTOMATICO		X10^3/μl		130-400		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PMO	90.36.3	17,90	PIOMBO EMATICO		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VERDE		Materiale SANGUE (PLASMA Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO fornetto grafite		Unità di misura µg/dl		Intervali di Riferimento Popolazione generale: < 30 Esposizione professionale:UOMO: 30-40 DONNA: 25-30 Lavoratrice età fertile: >40 = allontanamento		
Note						Data aggiornamento
						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PMO	90.36.3	17,90	PIOMBO URINARIO (INIZIO TURNO)		NO	SERVICE (L)
URINE		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V	
1 PROVETTA TAPPO VERDE						
Metodo		Unità di misura µg/g Creat.		Intervallo di Riferimento < 150		
ASSORBIMENTO ATOMICO fornello grafite						
Note						Data aggiornamento
L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PMO	90.36.3	17,90	PIOMBO URINARIO (FINE TURNO)		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VERDE		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO fornello grafite		Unità di misura µg/g Creat.		Intervallo di Riferimento < 150		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 121 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PRIM	90.37.5	8,05	PRIMIDONE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo FLUORESCENZA POLARIZZATA		Unità di misura microg/ml		Intervalli di Riferimento 5,0-12,0 ZONA TERAPEUTICA		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PCA	PRIVATO		PROCALCITONINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità IN BAGNO DI GHIACCIO	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ELFA		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento <0.5: rischio debole di sepsi grave e/o chock settico 0.5 - 2.0: rischio da interpretare tenendo conto del contesto clinico del Paziente >2.0: rischio elevato di sepsi grave e/o di chock settico		
Note						Data aggiornamento 20/02/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PRL	90.38.2	5,05	PROLATTINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità IN BAGNO DI GHIACCIO		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo ECLIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento 2.10-17.70		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PROG	90.38.1	11,50	PROGESTERONE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Intervalli di riferimento DONNE Fase follicolare 0.01-0.91 Fase lutea centr. 2.70-21.50 Fase luteica 2.65-21.10 Postmenopausa <0.39 IN GRAVIDANZA I trimestre 4.08-33.90 II trimestre 24.0-76.00 III trimestre 52.0-302.0 UOMINI: Adulti e ragazzi: <1,29		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 122 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PCAC	90.72.2	8,05	PROTEINA C FUNZIONALE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA COAGULAZIONE (Tappo azzurro)		Materiale SANGUE (PLAMA Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo CROMOGENICO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 70-130		
Note Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PCR	90.72.3	4,20	PROTEINA C REATTIVA		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V-S
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento < 0,30		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PCRS	PRIVATO		PROTEINA C REATTIVA AD ALTA SENSIBILITA'		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento < 0,30 = Negativo		
Note						Data aggiornamento
						05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PSL	90.72.4	8,65	PROTEINA S LIBERA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA COAGULAZIONE (Tappo azzurro)		Materiale SANGUE (PLAMA Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo COAGULATIVO		Unità di misura %		Intervalli di Riferimento 60-140		
Note Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						05/07/2018

 OSPEDALE “VILLA SALUS” LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 124 di 154 Allegati n.: 0
---	--	---

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
???	???	130,00	PROTOCOLLO INTOLLERANZE ALIMENTARI (90 ALIMENTI)		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
3 PROVETTE TAPPO ROSSO		SANGUE (SIERO)		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
EIA		U/ml		<50: NEGATIVO 50 - 100: DEBOLMENTE POSITIVO >100: POSITIVO		
Note						Data aggiornamento
Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						10/02/2016

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FPSA	90.56.5	9,30	PSA LIBERO	FREE PSA	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA		ng/ml		> 20% del PSA TOTALE		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PSA	90.56.5	9,30	PSA TOTALE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA		ng/ml		< 4		
Note						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
QUAN	PRIVATO		QUANTIFERON-TB		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
PROVETTE DEDICATE CONTATTARE IL LABORATORIO		SANGUE			15 gg. circa	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
		UI/ml		Negativo Antigeni specifici M. cut off > o uguale 0.35 Tuberculosis (ESAT-6, CFP10, TB7.7) Controllo positivo > o uguale 0.5 (MITOGENO) Controllo nullo < o uguale 8		
Note						Data aggiornamento
- Esame non eseguibile il VENERDI' e il SABATO Per il prelievo sono necessarie 4 provette: controllo nullo, antigene TB1, antigene TB2, e controllo Mitogeno Prelevare 1 mL di sangue per venopuntura direttamente nelle provette. Le provette sono dotate di una linea nera che indica il volume di riempimento. Il sangue prelevato deve raggiungere la linea nera. Miscelare il contenuto delle provette capovolgendole per 8-10 volte, o scuotendole per 5 secondi, verificando che l'intera superficie interna della provetta sia ricoperta di sangue. E' fondamentale agitare le provette per garantire che il campione di sangue si mescoli completamente al contenuto della provetta. Solo per il Laboratorio: - Le provette devono essere trasferite in un incubatore a 37°C entro 16 ore dal prelievo. NON refrigerare e NON congelare i campioni. - Dopo aver incubato le provette a 37°C per 18/24 ore, si centrifugano per 15 minuti a 3000 g. - I campioni così ottenuti possono essere inviati al Laboratorio Synlab.. Solo per la Medicina del Lavoro: - Le provette devono essere spedite lo stesso giorno del prelievo. Non possono essere prelevati e inviati campioni il venerdì e i giorni prefestivi. Provetta dedicata.						05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 125 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RESTR	90.69.4	1,35	RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V	
Metodo NEFELOMETRICO		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento 0.83-1.76		
Note						Data aggiornamento
						11/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TSHR	90.53.5	22,30	RECETTORI TSH (Anticorpi)	TRAB	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 5 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura IU/l		Intervalli di Riferimento ≤ 1.0 Negativo 1.1 - 1.5 Borderline > 1.5 Positivo		
Note: Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente a -20°C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RECAC	90.53.9	10,95	RECETTORI ACETILCOLINA (Anticorpi)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo RIA		Unità di misura nmol/l		Intervalli di Riferimento < 0,25 :Negativo0,25 0,40:Dubbio >0,40 :Positivo		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
REORT	90.40.2	22,75	RENINA ORTOSTATISMO ANGIOTENSINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura µIU/ml		Intervalli di Riferimento 4.4-46.1		
Note Curva di 2 prelievi (durata ore 2,30' sempre in piedi): 2 ore in piedi con deambulazione leggera L'analisi viene eseguita nel sangue (plasma) Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente a -20°C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 10/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 126 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RECL	90.40.2	22,75	RENINA CLINOSTATISMO ANGIOTENSINA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (PLASMA)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 10 gg/L-M-M-G-V
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura µIU/ml		Intervalli di Riferimento 2,80-39,90		
Note Curva di 2 prelievi (durata ore 2,30' sempre steso): 2 ore steso L'analisi viene eseguita nel sangue (plasma) Centrifugare subito +4°C e congelare immediatamente a -20°C. INVIARE IN APPOSITO CONTENITORE.						Data aggiornamento 10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ROGFL	90.74.3	3,70	RESISTENZA OSMOTICA	TEST DI SIMMEL ROE	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE		TEMPERATURA AMBIENTE	5 gg/L-M-M-G-VB:NON SI ACCETTA DI VENERDI' E NEI GIORNI PREFESTIVI	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
FOTOMETRICO		g/l		RESISTENZA MASSIMA: 0.2-0.4 RESISTENZA MINIMA: 0.6-08		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RETI	90.74.5	4,80	RETICOLOCITI		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE S		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 3 gg/L-M-M-G-V	
Metodo CONTEGGIO CON ANALIZZATORE AUTOMATICO		Unità di misura RET % VAL. ASS 10^3/ µl		Intervalli di Riferimento RETICOLOCITI 0,5 -2,0 Reticolociti Val. assoluto : 25-112 Reticolociti a basso contenuto di RNA(Retic L) Reticolociti a medio contenuto di RNA(Retic M) Reticolociti ad alto contenuto di RNA(Retic H)		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			RICERCA CORPI ASBESTOSICI		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 CONTENITORE CON CONSERVATIVO (vedi nota)		Materiale ESCREATO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V – S
Metodo Processatore Leica ASP 200S - Escreati/CASB		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVA		
Note La ricerca si esegue su espettorato (non salivare) in contenitore sterile con alcool al 70%						Data aggiornamento 9/11/2012

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 127 di 154 Allegati n.: 0

	91.05.5	3.10	RICERCA PARASSITA MALARICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VIOLA		Materiale SANGUE (PLASMA K EDTA)		Conservazione / Stabilità10/01/2015 TEMPERATURA AMBIENTE/VEDI NOTA	Tempi di consegna 7 gg / MA - ME - VE	
Metodo MICROSCOPICO (COL. PANOTTICA)		Unità di misura		Intervalli di Riferimento ASSENTE		
Note Il campione deve essere inoltrato entro due ore al Laboratorio						Data aggiornamento 05/07/2018

	90.93.5	5.45	Ricerca STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO gruppo A (S. pyogenes)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO FARINGEO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 3 gg / L-M-M-G-V-
Metodo PCR REAL TIME		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						24/09/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RUBG	91.26.4	9,70	ROSOLIA Anticorpi IgG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura UI/ml		Intervalli di Riferimento < 5 : Negativo 5,1-9,9 : Dubbio >10 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
RUBM	91.26.4	9,70	ROSOLIA Anticorpi IgM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità Tempi di M-M-G-V-	consegna TEMPERATURA AMBIENTE 2 gg/L-	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura INDEX		Intervalli di Riferimento <0,8 : Negativo 0,8-0,99: Dubbio >1,0 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 129 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	91.07.6	3.70	SALMONELLA (ricerca colturale)		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore CONTENITORE PER FECI		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V - S
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento Negativo		
Note						Data aggiornamento
- Le feci devono essere prelevate possibilmente all’esordio dell’enteropatia quando sono diarroiche e prima dell’inizio della terapia antibiotica. - Il materiale fecale deve essere raccolto evitando la contaminazione con urina. - Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nel contenitore e la quantità del campione deve essere pari a una “noce”. - E’ sconsigliato l’uso di tamponi rettali se non nel caso di neonati. - Il campione deve essere seminato nel più breve tempo possibile; il campione va conservato a temperatura ambiente per massimo 5 ore.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	91.07.4	6.50	SALMONELLA (identificazione sierologica di gruppo)		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale FECI		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE		Tempi di consegna 5 gg / L – M – M – G – V - S
CONTENITORE PER FECI						
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
IMMUNOLOGICO				Negativo		
Note						Data aggiornamento
- Le feci devono essere prelevate possibilmente all'esordio dell'enteropatia quando sono diarroiche e prima dell'inizio della terapia antibiotica. - Il materiale fecale deve essere raccolto evitando la contaminazione con urina. - Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nel contenitore e la quantità del campione deve essere pari a una “noce”. - E' sconsigliato l'uso di tamponi rettali se non nel caso di neonati. - Il campione deve essere seminato nel più breve tempo possibile; il campione va conservato a temperatura ambiente per massimo 5 ore.						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SHBG	90.25.7	10,15	S.H.B.G. SEX HORMONE BINDING		NO	SERVICE
			GLOBULIN			
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO (*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura nmol/l		Intervalli di Riferimento Uomini 10 - 57 Donne(non gravide) 18 - 144		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SACA	90.53.4	10,95	SACCHAROMYCES CEREVISIAE anticorpi IgA (ASCA)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo ELISA		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento < 12 : Negativo 12 - 18 : Dubbio > 18 : Positivo		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 130 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SACG	90.53.4	10,95	SACCHAROMYCES CEREVISIAE anticorpi IgG (ASCA)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo ELISA		Unità di misura UA/ml		Intervalli di Riferimento <i>< 12 : Negativo 12 - 18 : Dubbio > 18 : Positivo</i>		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAD	90.04.2	20,20	S-ADRENALINA		NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale PLASMA		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 7GG-L-M-M-G-V-S
Metodo HPLC		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento 20 - 190		
Note Prelevare 7 ml di sangue venoso in provetta contenente K-EDTA come anticoagulante. Centrifugare subito dopo a 3000 rpm per 3 minuti in centrifuga refrigerata (4°C). Prelevare circa 3 ml di plasma . Congelare il campione a – 20 °C ed inviare il campione negli appositi contenitori a – 20 °C.						Data aggiornamento
						17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SCOT	90.93.2	2,70	SCOTCH-TEST (ricerca Ossiuso)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
2 VETRINI CON SCOTCH		MUCOSA OROFIZIO ANALE		TEMPERATURA AMBIENTE		2 gg/L-M-M-G-V-
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
MICROSCOPICO				NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SCREEN1	??	??	DROGHE D'ABUSO (SCREENING- 1)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 10 ml Aliquota A, 20 ml Aliquote B e C		Materiale URINE (ESTEMPORANEE)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE (VEDI NOTA)	Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V-	
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Profilo: Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi, Metadone, Amfetamine, Metamfetamine, MDMA, Buprenorfina, Creatinina. Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C		
Note - Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C Per l' esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.						Data aggiornamento 05/07/2018

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 131 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SCREEN2	??	??	DROGHE D'ABUSO (SCREENING- 2)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 10 ml Aliquota A, 20 ml Aliquote B e C		Materiale URINE (ESTEMPORANEE)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE (VEDI NOTA)		Tempi di consegna 7 L-M-M-G-V-
Metodo IMMUNOCHEMICO		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Profilo: Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi, Metadone, Amfetamine, Metamfetamine, MDMA, Creatinina.		
Note - Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C Per l' esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.						Data aggiornamento 05/07/2018

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SRT	PRIVATO		SEROTONINA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 15 gg
Metodo HPLC		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento 80,0-160,0		
Note Separare siero, congelare a -20°C. Inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
USRT	PRIVATO		SEROTONINA URINARIA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		Materiale URINE 24 ORE ACIDIFICATE		Conservazione / Stabilità VEDI NOTA	Tempi di consegna 15 gg	
Metodo HPLC		Unità di misura µg/24h		Intervalli di Riferimento 88,0-176,0		
Note						Data aggiornamento
La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiiai di acido muriatico del commercio) al fine di avere un pH a 4,00. Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto. A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SAA	91.6R.F	10,00	SIERO AMILOIDE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 GG/L-M-M-G-V-	
Metodo nephelometric		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento <0,5		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS"	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 132 di 154 Allegati n.: 0
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA					

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
NA	90.40.4	1,10	SODIO PLASMATICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTE TAPPO ROSSO (*)		Materiale SANGUE(SIERO)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo POTENZIOMETRIA INDIRETTA		Unità di misura mEq/24h		Intervalli di Riferimento 136-145		
						Data aggiornamento
						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UNA	90.40.4	1,10	SODIO URINARIO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTE CAMPIONE URINE 24 ORE		URINE 24 ORE		TEMPERATURA AMBIENTE	2 gg/L-M-M-G-V-	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
POTENZIOMETRIA INDIRECTA		mEq/24h		40-220		
Note						Data aggiornamento
1. Eliminare le prime urine del mattino (entro le ore 7.00) 2. Dalla seconda minzione in poi raccogliere tutte le urine fino a quelle della mattina dopo, comprese, mantenendole al fresco e al buio in un recipiente chiuso 3. Mescolare le urine con il capovolgimento del contenitore 4. Travasare una parte delle urine, in DUE provette trascrivendo il volume e il nome. Recapitare al Laboratorio al più presto. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C						12/01/2015


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SOMAC	90.40.7	16,90	SOMATOMEDINA C	IGF	NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura ng/ml		Intervallo di Riferimento IN REVISIONE ETA' FEMMINE MASCHI 0-5A 33,5-171,8 27,4-113,5 5A-8A 79,8-244 54,9-206,4 8A-11A 87,4-399,3 85,2-248,8 11A-15A 188,4-509,9 115,4-498,2 15A-20A 267,0-470,8 247,3-481,7 20A-24A 149,1-332,3 187,9-400 24A-39A 108,8-246,7 96,4-227,8 39A-54A 92,7-244,6 88,3-209,9 >54A 54,0-204,4 54,60-185,7		
Note						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SALS	90.54.2	7,55	SPERMATOZOO Anticorpi sierici		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale	Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)	TEMPERATURA AMBIENTE		7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura	Intervalli di Riferimento			
EMOAGGLUTINAZIONE			ASSENTI			
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

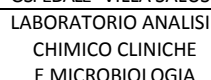

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 133 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SURAB	90.54.3		SURRENE Anticorpi		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)	Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 8 gg/ M-V	
Metodo IFI		Unità di misura TITOLO	Intervalli di Riferimento < 1/20 NEGATIVO			
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

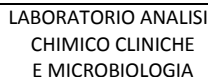

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 134 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
OCID	90.93.3	5,90	TAMPONE CONGIUNTIVALE DX		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO CONGIUNTIVALE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 135 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TF	90.93.5	5,45	TAMPONE FARINGEO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO TONSILLARE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE		Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TFBM	91.09.2	5,10	TAMPONE FARINGEO RICERCA STREPTO BETA EMOLITICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 TAMPONESTERILE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO TONSILLARE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 5 ORE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TND	90.93.5	5,45	TAMPONE NASALE DX		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO NASALE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 24 ORE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TNS	90.93.5	5,45	TAMPONE NASALE SX		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 2 TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO		Materiale ESSUDATO NASALE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO 24 ORE	Tempi di consegna 7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note						Data aggiornamento
Contattare Sezione Microbiologia Laboratorio.						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 136 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SV	90.93.4	5,45	TAMPONE VAGINALE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE STERILE CONTATTARE LABORATORIO		laterale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna 5 GG/ LU-MA-ME-GI
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note CONTATTARE SEZIONE MICROBIOLOGIA LABORATORIO ANALISI						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
SVBM	90.08.4	3,25	TAMPONE VAGINALE PER RICERCA STREPTO-BETA EMOLITICO		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore TAMPONE STERILE CONTATTARE LABORATORIO		laterale		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE CONSEGNARE ENTRO 15 MINUTI	Tempi di consegna 5 GG/ LU-MA-ME-GI	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NEGATIVO		
Note CONTATTARE SEZIONE MICROBIOLOGIA LABORATORIO ANALISI						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita		Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
BAT3	90.86.1	10,75	TAMPONI VARI			NO	INTERNO
TAMPONE SPECIFICO STERILE		laterale VARI		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna	
Metodo COLTURALE		Unità di misura		Intervalli di Riferimento NESSUNA CRESCITA BATTERICA			
Note CONTATTARE SEZIONE MICROBIOLOGIA LABORATORIO ANALISI							Data aggiornamento
							12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PT	90.75.4	2,25	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE/VEDI NOTA	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COAGULATIVO		Unità di misura INR		Intervallo di Riferimento < 1.20 RANGE TERAPEUTICO: Protesi valvolari e meccaniche a basso rischio: 2.0-3.0 Fibrillazione atriale e valvulopatia mitralica: 2.0-3.0 Tromboembolismo venoso (anche Ab anti fosfolipidi): 2.0-3.0 Protesi valvolari meccaniche: 2.5-3.5 Protesi valv. meccaniche doppie e/o ad alto rischio: 3.0-4.0		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 137 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
PTT	90.76.1	2,25	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE P.T.T		SI	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na-Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE/VEDI NOTA	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
Metodo COAGULATIVO		Unità di misura SECONDI		Intervalli di Riferimento 25,0-36,0		
Note: se non esaminato subito procedete come di seguito indicato: -agitate delicatamente per inversione almeno 3 volte, - centrifugate immediatamente a 3000 giri per 10 minuti, - prelevate una aliquota di surnatante (almeno 1 ml) e congelate rapidamente a - 20 ° C Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento 12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TEOV	90.41.2	9,70	TEOFILLINA		NO	SERVICE(S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V –
Metodo IMMUNOMETRICO		Unità di misura microg/mL		Intervalli di Riferimento RANGE TERAPEUTICO 10-20 Limite minimo di rilevabilità': 0,16 microg/ml		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TIG	90.27.3	11,50	TEST DI GRAVIDANZA (PROVA IMMUNOLOGICA)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA URINE		Materiale URINE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo IMMUNOCROMATOGRAFICO		Unità di misura SES.25mUI/ml		Intervalli di Riferimento NEGATIVO-POSITIVO		
Note					Data aggiornamento 12/01/2015	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
	90.41.3	11,50	TESTOSTERONE TOTALE		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V –
Metodo EIA		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento Maschi: < 12 anni: <0.10 - 1.01 12 - 18 anni: 0.56 - 8.63 19 - 55 anni: 2.12 - 6.01 > 55 anni : 0.11 - 7.25 Donne: < 12 anni: <0.10 - 0.16 12 - 18 anni: <0.10 - 0.63 19 - 55 anni: <0.10 - 0.63 > 55 anni : < 0.10- 0.32		
Note						Data aggiornamento 24/11/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 138 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TETG	90.41.4	13,90	TETANO IgG anti tossina		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo EIA		Unità di misura IU/ml		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
THIN	??	??	THIN-PREP PAP TEST		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
VEDI NOTA		VEDI NOTA		VEDI NOTA		
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
Note						Data aggiornamento
Per l'esecuzione dell' esame prenotare attraverso il CUP al numero 800 599 399						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TIMCH	PRIVATO		TIMIDINA CHINASI	TK	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 15 gg / L – M – M – G – V –
Metodo LIA		Unità di misura U/l		Intervalli di Riferimento < 7,50		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			TIOCIANATO PLASMATICO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO VERDE(*)		Materiale SANGUE (Plasma Li Eparina)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 GG/L-M-M-G-V-
Metodo POTENZIOMETRIA DIRETTA		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento NON FUMATORI: <6 FUMATORI: < 15		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 139 di 154 Allegati n.: 0
---	--	---

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			TIOCIANATO URINARIO (INIZIO TURNO)		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura mg/g Creat.		Intervallo di Riferimento		
POTENZIOMETRIA DIRETTA				Non fumatori: < 3.20 Fumatori: < 8.00		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + °C						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
			TIOCIANATO URINARIO (FINE TURNO)		NO	SERVICE (S)
URINE		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO VERDE		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg/L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
POTENZIOMETRIA DIRETTA		mg/g Creat.		Non fumatori: < 3.20 Fumatori: < 8.00		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a + °C						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FELIN	91.47.A X 8	14,40X8	TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA COMPLETA		NO	SERVICE
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
2 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE S		TEMPERATURA AMBIENTE	3 gg / L - M - M - G -	
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
CITOFLOUREMETRIA		/µL / µL % % /µL % % % /µL -		LEUCOCITI 4800-10800 LINFOCITI 1500-4000 CD3 + 67-80 CD4+ CD3+ 35-55 CD4+ CD3+ 500-2200 CD8+ CD3+ 20-38 CD19 7-14 CD3- CD16+ CD56+ 4,0-8,0 CD3+ CD16+ CD56+ 1-11 RAPPORTO CD4/CD8 1.20-2.20		
Note						Data aggiornamento
L'ESAME VIENE ESEGUITO DAL LUNEDÌ A GIOVEDÌ (NO PREFESTIVI)						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ATIR	90.54.4	11,20	TIREOGLOBULINA Anticorpi-Anti(AbTg)		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE	3 gg / L - M - M - G - V -	
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
CHEMILUMINESCENZA		UI/ml		< 0,60		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

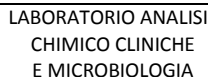

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 140 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TOUI	??	??	TOLUENE URINARIO (Inizio Turno)	TOLUOLO URINARIO	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINA		Materiale URINE INIZIO TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg
Metodo GAS CROMATOGRAFIA		Unità di misura mg/l		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: < 1 Soggetti professionalmente esposti: < 0.03 BEI ACGIH 2014		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						10/01/2015


 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 141 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TOUF	??	??	TOLUENE URINARIO (Fine Turno)	TOLUOLO URINARIO	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA URINA		URINE FINE TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE	7 gg	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
GAS CROMATOGRAFIA		µg/l		Popolazione generale: < 1 Soggetti professionalmente esposti: < 30		
Note						Data aggiornamento
• L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circ						10/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TOXG	91.09.6	9,70	TOXOPLASMA Anticorpi IgG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura UI/ml		Intervalli di Riferimento < 6.4 : Negativo 6.4-9.9: Dubbio > 10 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TOXM	91.09.6	9,70	TOXOPLASMA Anticorpi IgM		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura INDEX		Intervalli di Riferimento < 0.90 : Negativo 0.90-0.99: Dubbio > 1.0 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TOXMC	?	?	TOXOPLASMA Anticorpi IgM CONFERMA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità REFRIGERARE (VEDI NOTA)	Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo ELFA		Unità di misura		Intervalli di Riferimento IN REVISIONE		
Note Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a + 4°C.						Data aggiornamento
						05/07/2018

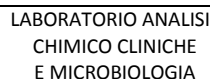

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 142 di 154
Allegati n.: 0


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TRF	90.42.5	4,50	TRANSFERRINA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 7 gg / L – M – M – G – V –
Metodo IMMUNOTURBIDIMETRICO		Unità di misura mg/dl		Intervalli di Riferimento 200-364		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 143 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
UIBC	90.22.5 90.42.5 90.42.4X2	2,,3 4,5 3,5X2	TRANSFERRINA INSATURA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 3 gg / L – M – M – G – V –
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
		µg/dl FERRO		FEMMINA 40 - 145		
		mg/dl TRANSFERRINA		MASCHI 60-160		
CHEMILUMINESCENZA		TRF- SATURA TRF- INSATURA		<4 gg. 130-275 >4 gg 200-360		
				30-40 155-300		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TRA	90.53.D	9,70	TRANSGLUTAMINASI Anticorpi IgA		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento ≤ 9: Negativo 9-16: Dubbio ≥16 : Positivo		
Note						Data aggiornamento
						15/07/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
TRG	90.53.D	9,70	TRANSGLUTAMINASI Anticorpi IgG		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 4 gg / L – M – M – G – V –	
Metodo EIA		Unità di misura U/ml		Intervalli di Riferimento <20 <i>Negativo</i> >= 20 <i>Positivo</i>		
Note						Data aggiornamento
						15/07/2015

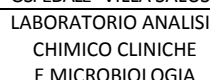

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 145 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
U	90.44.3	2,05	URINE COMPLETE Esame chimico-fisico		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale URINA DEL MATTINO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 1 gg / L – M – M – G – V – S	
1 PROVETTA DA URINE						
Metodo		Unità di misura		Intervallo di Riferimento		
Chimico-fisico-microscopico						
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI				Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 148 di 154 Allegati n.: 0	

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VITE	90.45.2	9,25	VITAMINA E		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 9 gg	
Metodo HPLC		Unità di misura µg/dl		Intervalli di Riferimento 500-1800		
Note SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE a -20 °C. Consegnare negli appositi contenitori.						Data aggiornamento 12/01/2015
Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VIP	PRIVATO		VIP Polipeptide intestinale vasoattivo		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA SPECIFICA		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 10 gg/ PREVIO ACCORDO CON IL LABORATORIO	
Metodo RIA		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento < 63,0		
Note Prelevare in 1 provetta di EDTA-aprotinina (contattare Laboratorio Analisi). SEPARARE E CONGELARE IMMEDIATAMENTE a -20 °C. Consegnare negli appositi contenitori.						Data aggiornamento 12/01/2015

VITA	90.45.1	9,25	VITAMINA A		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE (plasma)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 8 gg/ L-M-M-G-V
Metodo HPLC		Unità di misura mg/L		Intervalli di Riferimento 0.3 - 0.7		
Note SEPARARE SIERO, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VITB1	90.45.1	9,25	VITAMINA B1		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO		Materiale SANGUE		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 8 gg/ L-M-M-G-V
Metodo HPLC		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento		
Note SEPARARE PLASMA, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore.						Data aggiornamento 12/01/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI					Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 149 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
B12	90.13.5	8,05	VITAMINA B12		NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELARE		Tempi di consegna 5 gg/I-M-M-G-V
Metodo CHEMILUMINESCENZA		Unità di misura pg/ml		Intervalli di Riferimento 210-910		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE SIERO, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VIB2	90.45.1	9,25	VITAMINA B2 Ematica		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA EMOCROMO		SANGUE (PLASMA)		CONGELARE		10 GG
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC		microgr/l		137-370		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE PLASMA, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VITB6	??	??	VITAMINA B6 Ematica		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità	Tempi di consegna	
1 PROVETTA EMOCROMO		SANGUE (PLASMA K EDTA)		CONGELARE	10 GG	
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
HPLC		microgr/l		137-370		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE PLASMA , CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						10/8/2013

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VITC	90.45.1	9,25	VITAMINA C		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità IN BAGNO DI GHIACCIO/CONGELATO		Tempi di consegna 8 gg/ L-M-M-G-V
Metodo HPLC		Unità di misura μmol/L		Intervalli di Riferimento 26.1 - 84.6		
Note Il campione deve essere posto in ghiaccio immediatamente dopo il prelievo. SEPARARE SIERO, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						Data aggiornamento 17/03/2017

OSPEDALE "VILLA SALUS"

LABORATORIO ANALISI
CHIMICO CLINICHE
E MICROBIOLOGIA

VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI


Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 150 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita		Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VITD	90.44.5	14,35	VITAMINA D (25 OH)		CALCIFEROLO 25 MONOIDROS VITAMINA D ;I 25OH VITAMINA D	NO	INTERNO
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna	
1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		SANGUE (siero)		TEMPERATURA AMBIENTE		3 gg/ L-M-M-G-V	
Metodo		Unità di misura ng/ml		Intervalli di Riferimento			
CHEMILUMINESCENZA				CARENZA <20 INSUFFICIENTE 21-29 SUFFICIENTE 30-100			
Note							Data aggiornamento
							12/01/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
V125	PRIVATO		VITAMINA D 1-25 DIIDROSSICOLECALCIFEROLO	VITD3	NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità CONGELATO	Tempi di consegna 8 gg/ L-M-M-G-V	
Metodo IMMUNOENZIMATICO		Unità di misura pg/l		Intervalli di Riferimento 16,0-81,0		
Note SEPARARE SIERO, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						Data aggiornamento
						16/04/2015


Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
VE	90.45.2	9,25	VITAMINA E		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA DA EMOCROMO		SANGUE (plasma)		CONGELARE		9 gg
Metodo		Unità di misura mg/L		Intervalli di Riferimento		
HPLC				5 - 20		
Note						Data aggiornamento
SEPARARE SIERO, CONGELARE a -20°C , CONSERVARE AL BUIO. Inviare in apposito contenitore						17/03/2017

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
FVW	90.64.1	20,50	VON WILLEBRAND FACTOR ANTIGENE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA COAGULAZIONE		Materiale SANGUE (PLASMA Na Citrato)		Conservazione / Stabilità CONGELARE	Tempi di consegna 12 gg	
Metodo		Unità di misura %		Intervallo di Riferimento 50 - 160		
Note Separare subito dopo il prelievo e congelare. Inviare in apposito contenitore a -20°C						Data aggiornamento
						12/01/2015

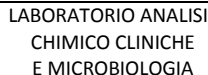

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 151 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
XFRAG	91.30.3 91.36.5	137,60 40,10	X FRAGILE		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
2 PROVETTE DA EMOCROMO		ANGUE		TEMPERATURA AMBIENTE		20 gg LI-M-M-G
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
CITOGENETICA				VEDI ALLEGATO		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

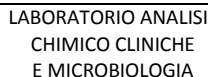

Tipo doc: MA
Centro di costo: SERLAB
Documento n.: 109
Rev.: 04
Data: 05/07/2018
Pagina: 152 di 154
Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ZN	90.45.4	5,50	ZINCO		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA TAPPO ROSSO(*)		Materiale SANGUE (siero)		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE		Tempi di consegna 10 gg
Metodo ASS. ATOMICO		Unità di misura µg/dl		Intervallo di Riferimento Soggetti non Esposti: 80-160		
Note						Data aggiornamento
						10/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ZNUF	90.45.4	5,50	ZINCO URINE FINE TURNO		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA URINE		Materiale URINE FINE TURNO		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 10 gg	
Metodo ASSORBIMENTO ATOMICO		Unità di misura µg/l		Intervalli di Riferimento 250-1200		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta alla fine del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						12/09/2015

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ZNUI	90.45.4	5,50	ZINCO URINE INIZIO TURNO		NO	SERVICE (L)
Tipologia provetta / contenitore		Materiale		Conservazione / Stabilità		Tempi di consegna
1 PROVETTA URINE		URINE INIZIO TURNO		TEMPERATURA AMBIENTE		10 gg
Metodo		Unità di misura		Intervalli di Riferimento		
ASSORBIMENTO ATOMICO		µg/l		250-1200		
Note • L'esame si esegue su campione di urina raccolta all'inizio del turno di lavoro. Campioni non consegnati immediatamente vanno conservati in frigorifero a +4°C circa.						Data aggiornamento
						12/09/2015

 OSPEDALE "VILLA SALUS" LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA	VADEMECUM CON ESAME E PARAMETRI	Tipo doc: MA Centro di costo: SERLAB Documento n.: 109 Rev.: 04 Data: 05/07/2018 Pagina: 153 di 154 Allegati n.: 0

Sigla	Codice Regionale	Ticket	Analita	Sinonimo	Ric. Urgente	Laboratorio
ZNC	PRIVATO		ZINCO-PROTOPORFINA		NO	SERVICE (S)
Tipologia provetta / contenitore 1 PROVETTA DA EMOCROMO (TAPPO VIOLA)		Materialiale SANGUE		Conservazione / Stabilità TEMPERATURA AMBIENTE	Tempi di consegna 7 gg	
Metodo FLUORIMETRIA		Unità di misura µg/gHb		Intervalli di Riferimento Popolazione generale: <2,5 Lavoratori professionalmente esposti: >12 allontana		
Note						Data aggiornamento
						12/01/2015

